FORTSCHRITTLICHE STEH- UND AUFRICHTHILFE

Sara® Plus



Sara Plus ist eine elektrisch angetriebene Steh- und Aufrichthilfe, die für aktive Transfers, Gleichgewichts-, Schritt- und Gehübungen ausgelegt ist.

ARJO-MOBILITÄTSGALERIE



C D

© Arjo 2019

C. Ist in der Lage, sein Gewicht auf mindestens einem Bein abzustützen. Nutzt einen Rollstuhl zur Mobilität.

D. Ist nicht in der Lage, das eigene Gewicht auf den Füßen zu tragen. Kann mit ausreichender Unterstützung sitzen.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Arjo.

- **Verbesserte Mobilität durch Übungen**
  Die Sara Plus verfügt über eine abnehmbare Fußplatte sowie eine Armauflage und einen Körpergurt zur Unterstützung. Somit kann sie bei Gleichgewichts-, Schritt- und Gehübungen unterstützen.
- **Oberkörperunterstützung**
  Die Armauflage ist ein wesentlicher Bestandteil des Hebevorgangs und dient während des Aufrichtens der zusätzlichen Unterstützung des Oberkörpers.
- **Eine Pflegekraft**
  Die Sara Plus ist für die Bedienung durch eine einzelne Pflegekraft ausgelegt und kann eine kostenwirksame Lösung für Transfers im Stehen, Schritt- und Gehübungen bieten.
- **Gurtlösungen**
  Der Seilgurt ist speziell für die Sara Plus konzipiert. Er bietet eine sichere Befestigung am Lifter, wodurch der Patient oder Bewohner nahe an der Armauflage gehalten und gestützt wird. Es sind unterschiedliche Arten von Körpergurten erhältlich: zur Unterstützung beim Stehen, Transfer/Gehen sowie eine abwischbare Variante.
- **Optionale Waage**
  Eine optionale integrierte Personenwaage erleichtert den Wiegevorgang.

Ausstattungsmerkmale



ARMAUFLAGE
Die Armauflage stützt den Arm und Oberkörper des Pflegebedürftigen und kann ihm helfen, sein Gewicht nicht nur mit den Füßen, sondern auch mit der oberen Extremität zu unterstützen.

PRO-AKTIVE KNIESTÜTZE
Die pro-aktive Kniestütze bietet Unterstützung und Stabilität. Sie ermöglicht eine natürliche Vorwärtsbewegung der Knie sowie ein Beugen der Knöchel während der Steh- und Sitzvorgänge.

ABNEHMBARE FUSSPLATTE
Durch die abnehmbare Fußplatte werden Schritt- und Gehübungen unterstützt, bei denen die Füße des Pflegebedürftigen unmittelbar auf dem Boden stehen.


DUALES BEDIENFELD
Bedienfelder an der Säule und der Handbedienung. Die Pflegekraft kann die Handbedienung verwenden und so nahe am Patienten/Bewohner bleiben und während des gesamten Vorgangs guten Augenkontakt halten.

WAAGE (OPTIONAL)
Die Waage kann verwendet werden, um Patienten/Bewohner zu wiegen und ihre Gewichtsübernahme zu überwachen, wenn die Sara Plus ohne Fußplatte verwendet wird.

PRODUKTINFORMATIONEN	
Max. sichere Arbeitslast (SAL)	190 kg
Liftergewicht (einschl. Batterie)	78,7 kg
Min. Höhe bei Lagerung	1195 mm
Minimale Hubhöhe	906 mm
Maximale Hubhöhe	1497 mm
Äußere Breite bei geschlossenem Fahrgestell	646 mm
Äußere Breite bei geöffnetem Fahrgestell	1107 mm
Innere Breite bei geschlossenem Fahrgestell	534 mm
Innere Breite bei geöffnetem Fahrgestell	1002 mm
Abstand des Fußes zum Boden (oberer Rand der Fußausleger zum Boden)	116 mm
Freiraum unter dem Fahrgestell (Boden bis Unterseite des Gestells)	30 mm
Gesamtlänge des Lifters	1033 mm
Wenderadius	1235 mm
Schutzart Lifter	IPX4
Handbedienung, Schutzart	IPX7
Akku	24 V, 6 Ah
Akku-Ladeanzeige	
Betriebsstundenzähler - zeigt die Gesamtbetriebszeit an (Stunden)	
Not-Aus-Schalter und Notablass	
Automatische Sicherheitsabschaltung beim Absenken auf ein Hindernis	
Leichtgängige Lenkrollen, die beiden hinteren mit Feststellbremsen	

ZUBEHÖR
Große Auswahl an waschbaren Körpergurten, patientenspezifischen Gurten und abwischbaren Gurten
Toilettensitz
Fußplatte schmal
Fußplatte Erweiterung
Kniestütze breit
Kniestütze mit Fleece-Bezug
Armgurte
Bein-Befestigungsbänder
Optional: Integrierte Waage

PLATZBEDARF

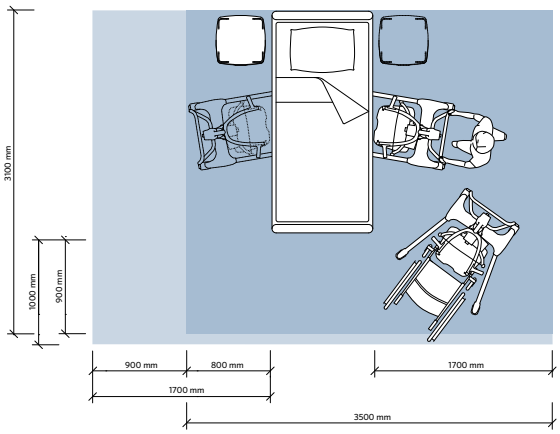

- Der blaue Bereich zeigt den mindestens benötigten Arbeitsbereich, damit die Pflegekraft die technischen Hilfsmittel auf ergonomische Weise von einer Seite benutzen kann.
- Der hellblaue Bereich zeigt den zusätzlich benötigten Platz, wenn an beiden Seiten ausreichend Raum zum Arbeiten und Bewegen für Bewohner/Patient, technisches Hilfsmittel und Pflegekraft zur Verfügung stehen soll.

November 2019. Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. ® und ™ sind eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe. Arjo.A00173.2.0.DE.DE
Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo Deutschland GmbH • Peter-Sander-Straße 10 • 55252 Mainz-Kastel • Deutschland • +49 6134-186 0
Arjo AG • Fabrikstrasse 8/Postfach • 4614 Hägendorf • Schweiz • +41 (0) 61 337 97 77
Arjo Austria GmbH • Lemböckgasse 49A • 123 Wien • Österreich • +43 (0) 866 56