Größen- und Messtabelle für Körpergurte von Arjo

Das Gurtgrößen- und -messsystem von Arjo berücksichtigt sowohl die Größe (falls anwendbar) als auch die Breite des Pflegebedürftigen, um die richtige Gurtgröße zu bestimmen.
Das System enthält Größentabellen (mit unterschiedlichen Farbmarkierungen für die Größen), um die Patientenmaße mit den Gurtgrößen abzustimmen. Die Tabellen und Anweisungen wurden spezifisch für die verschiedenen Gurttypen erstellt und sind auch in der Bedienungsanleitung zu finden.
Es gibt viele verschiedene Bedienungsanleitungen für Arjo-Gurte, und in diesem Leitfaden sind alle Größentabellen und Messanleitungen in einem Dokument zusammengefasst, um Ihnen die effiziente Ermittlung der Gurtgröße zu erleichtern.
Diese Anleitung befasst sich jedoch nur mit Größe und Abmessungen der Gurte und ist somit kein Ersatz für die Bedienungsanleitungen der jeweiligen Gurte. Beachten Sie bei der Verwendung von Arjo-Körpergurten stets die Bedienungsanleitung.

Woher weiß ich, dass ich die richtige Größe gewählt habe?

Sobald der Gurt am Pflegebedürftigen angebracht ist, ist anhand von einigen wichtigen Indikatoren zu überprüfen, ob die richtige Größe gewählt wurde.
Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Anlegen des Gurts“ in der Bedienungsanleitung des Gurts;

1. Suchen Sie die Artikelnummer des Gurts (z. B. auf dem Produktetikett).





2. Die richtige Größentabelle finden Sie in der Produktliste.
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der Tabelle, um die Größe und Breite des Pflegebedürftigen zu messen, und ziehen Sie die Tabelle zurate, um die Gurtgröße zu ermitteln.

PRODUKTLISTE		
Artikelnummer	**Name des Gurts**	**Name der Tabelle**
MAA2000M	Clipgurt – ungepolstertes Beinteil	„Normale Passiv-Clipgurte“, Seite 4
MAA2040M	In-situ-Clipgurt – ungepolsterter Beinbereich	
MAA2070M	In-situ-Clip-Badegurt – ungepolstertes Beinteil	
MAA4000M	Clipgurt – gepolstertes Beinteil	
MAA4050M	Clip-Komfortgurt – gepolsterter Beinbereich	
MAA4060M	Clip-Badegurt – ungepolstertes Beinteil	
MAA4061M	Clip-Badegurt – gepolstertes Beinteil	
MFA1000M	Einweg-Clipgurt:	
MAA4031M	Toilettenclipgurt – gepolsterter Beinbereich	
MAA4100M	Clipgurt – gepolstertes und verlängertes Beinteil	„Clipgurte mit Beinverlängerung“, Seite 5
MAA4160M	Clip-Badegurt – ungepolstertes und verlängertes Beinteil	
MFA2100	Einweg-Schlaufengurt	„Passive Schlaufengurte“, Seite 6
MLA2000	Schlaufengurt – gepolsterte Beine	
MLAAS2000	In-situ-Schlaufengurt – gepolstertes Beinteil	
MLA3000	Schlaufengurt – gepolstertes Beinteil, ohne Kopfstütze	
MLA4060	Schlaufengurt zum Baden – ungepolsterte Beine	
MLA4031	Toilettenschlaufengurt – gepolsterter Beinbereich	
MLA4531	Schlaufen-Toilettengurt – gepolstertes Beinteil, ohne Kopfstütze	
MAA4020M	Kinder-Clipgurt	„Gurt für Kinder“, Seite 7
THA6i	Schlaufen-Hängemattengurt – 6 Befestigungsbänder	„Hängematten-Gurte“, Seite 8
THAi	Schlaufen-Hängemattengurt – 4 Befestigungsbänder	
TIR	Schlaufen-Quick-Fit-Gurt – ohne Kopfstütze	„TIR-Gurt“, Seite 9
MAA2050M	In-situ-Clipgurt für Beinamputierte	„Clipgurte für beidseitig Beinamputierte“, Seite 10
MAA2080M	In-situ-Badeclipgurt für Beinamputierte	
MAA2090M	Clipgurt für Beinamputierte	
MAA2091M	Clip-Toilettengurt für Beinamputierte	
MAA4040M	Clipgurt für Beinamputierte mit Klettverschluss	
MAA7090M	Clip-Badegurt für Beinamputierte	


PRODUKTLISTE		
Artikelnummer	**Name des Gurts**	**Name der Tabelle**
MAA4070M	Clipgurt für rechtsseitig Beinamputierte	„Clipgurte für einseitig Beinamputierte“, Seite 11
MAA4080M	Clipgurt für linksseitig Beinamputierte	
MLA7000	Schlaufen-Hängemattengurt für Beinamputierte	„Hängemattengurt für Amputierte“, Seite 12
MAA8000	Bariatrischer Schlaufen-Komfortgurt	„Bariatrische Gurte“, Seite 13
MAA8010	Bariatrischer Schlaufengurt	
MFA8010	Bariatrischer Einweg-Schlaufengurt	
MAA8020	Bariatrischer Schlaufen-Hängemattengurt – geteiltes Beinteil	
MAA8030	Bariatrischer Schlaufen-Hängemattengurt	
MAA3071M	Sara Stehclipgurt – flach	„Steh- und Gehgurte für den Transfer“, Seite 14
MFA3000	Sara Flex Einweg-Stehgurt	
TSS.500 - 504	Sara Flex Stehgurt	
TSS.500S-1C - 503S-1C	Sara Flex Stehgurt – separater Gurt mit einem Clip	
TSS.500W - TSS.503W	Sara Flex abwischbarer Stehgurt	
TSS.511	Sara Flex Sitz-Transfergurt	
KKA5120	Sara Plus Stehgurt	
KKA5130M	Sara Plus Gehgurt	
KKA5370	Sara Plus Stehgurt – mit Gesäßunterstützung (EPS, extra postural support)	
MFA4000	Sara Plus Einweg-Stehgurt	
KKA6000	Sara Plus abwischbarer Stehgurt	
MFA5100	Einweg-Schlaufen-Mobilisierungsgurt	„Schlaufen-Gehgurt“, Seite 15
MFA5200	Einweg-Schlaufen-Mobilisierungsgurt Plus	
MFA5210	Einweg-Schlaufen-Mobilisierungsgurt Plus – Beinverlängerung	
MLA5100	Schlaufen-Mobilisierungsgurt	
MLA5200	Schlaufen-Mobilisierungsgurt Plus	
MLA5210	Schlaufen-Mobilisierungsgurt Plus – Beinverlängerung	
MAA1150	Schlaufen-Liegegurt – mit Pflegeöffnung	„Liegegurte“, Seite 16
MAA1151	Schlaufen-Liegegurt	
MAA1152	Schlaufen-Badeliegegurt – mit Pflegeöffnung	
MFA5000	Einweg-Schlaufen-Liegegurt	

Normale Passiv-Clipgurte


Größentabelle

Gurtmodelle
MAA2000M, MAA2040M, MAA2070M, MAA4000M, MAA4060M, MAA4031M, MAA4061M, MFA1000M, **MAA4050M***

Oberkante des Kopfes bis Steißbein

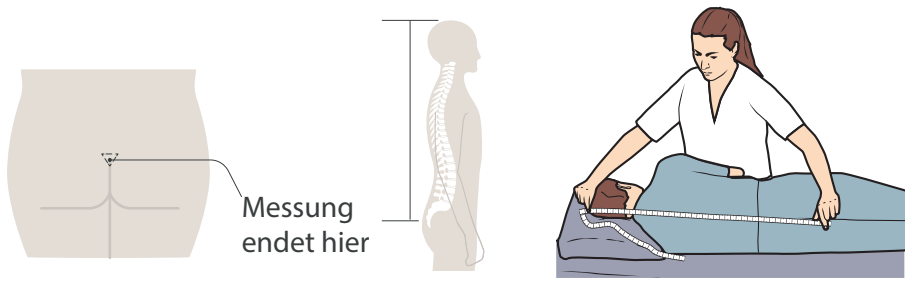

Unterer Hüftumfang

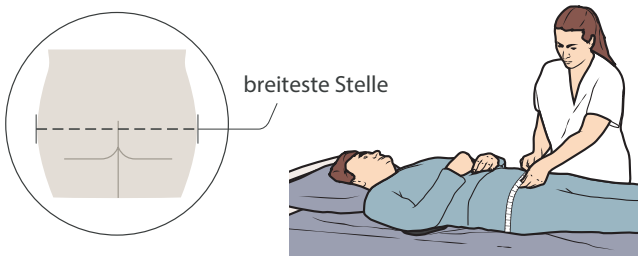


cm (in)	60–65 (23,5–25,5)	66–73 (26–29)	74–81 (29–32)	82–89 (32,5–35)	90–95 (35,5–37,5)	96–103 (38–40,5)
70–80 (27,5–31,5)	XS	S	M	L	LL	XL
81–93 (32–36,5)	S	S	M	L	LL	XL
94–106 (37–41,5)	M	M	M	LL	LL	XL
107–125 (42–49)	M	L	L	LL	XL	XL
126–136 (49,5–53,5)	L	LL	LL	LL	XL	XL
137–155 (54–61)	XL	XL	XL	XL	XL	XXL
156–220 (61,5–86,5)* *** ist auf 200 cm/78,5 Zoll begrenzt**	/	/	XXL	XXL	XXL	XXL

Clipgurte mit Beinverlängerung


Größentabelle

Gurtmodelle
MAA4100M, MAA4160M

Oberkante des Kopfes bis Steißbein

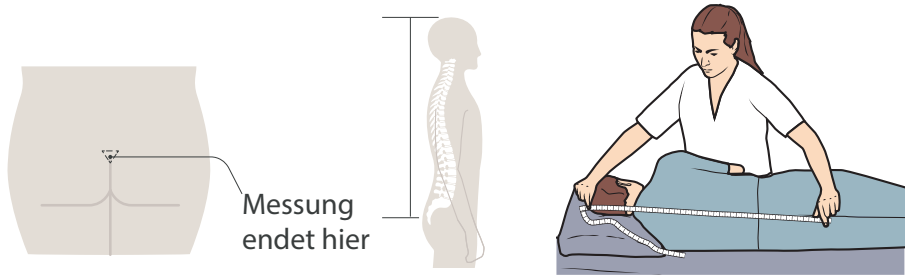

Unterer Hüftumfang

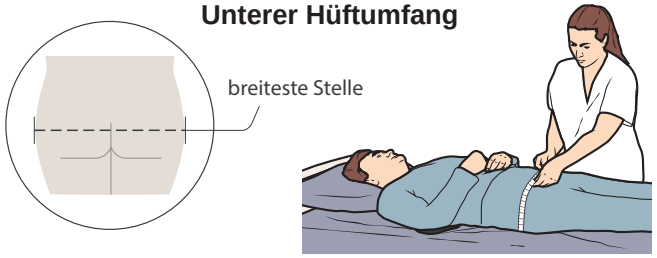


cm (in)	60–65 (23,5–25,5)	66–73 (26–29)	74–81 (29–32)	82–89 (32,5–35)	90–95 (35,5–37,5)	96–103 (38–40,5)
87–100 (34–39,5)	S	S	M	L	LL	XL
101–117 (40–46)	M	M	M	LL	LL	XL
118–130 (46,5–51)	M	L	L	LL	XL	XL
131–145 (51,5–57)	L	LL	LL	LL	XL	XL
146–175 (57,5–69)	XL	XL	XL	XL	XL	XXL
176–240 (69,5–97,5)	/	/	XXL	XXL	XXL	XXL


Passive Schlaufengurte


Größentabelle

Gurtmodelle
MLA2000, MLAAS2000, MLA4060, MLA4031, MLA4531, MFA2100, MLA3000


Oberkante des Kopfes bis Steißbein

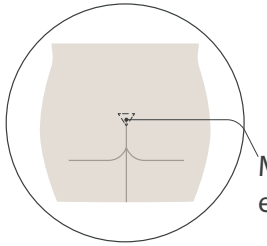

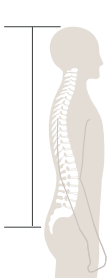

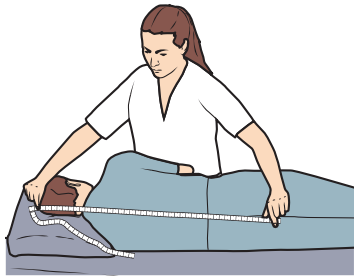

Unterer Hüftumfang

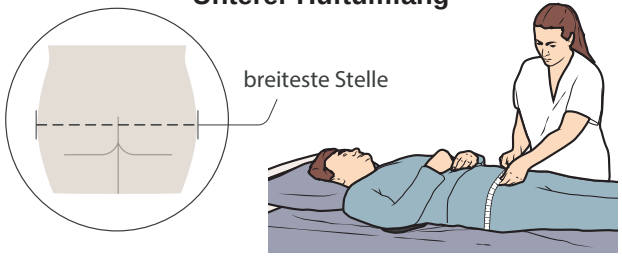


cm (in)	65–71 (25,5–28)	72–79 (28,5–31)	80–85 (31,5–33,5)	86–93 (34–36,5)	94–105 (37–41,5)
79–99 (31–39,5)	S	M	L	L	/
100–116 (40–45,5)	M	M	L	XL	XXL
117–133 (46–52,5)	M	L	L	XL	XXL
134–154 (53–60,5)	L	XL	XL	XL	XXL
155–170 (61–67)	/	XXL	XXL	XXL	XXL


Gurt für Kinder


Größentabelle

Gurtmodell
MAA4020M

Oberkante des Kopfes bis Steißbein

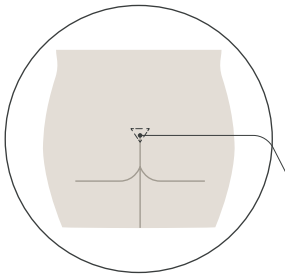

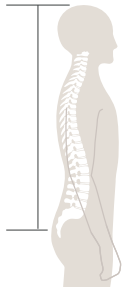

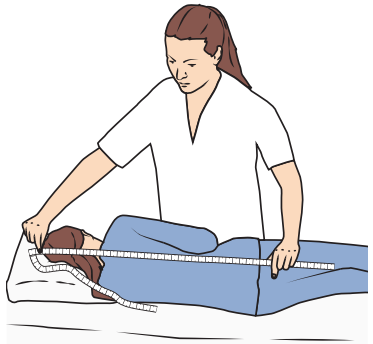


	cm (in)	50–54 (19 1/2–21 1/4)	55–59 (21 1/2–23 1/4)	60–65 (23 1/2–25 1/2)	66–73 (25 3/4–28 3/4)
Unterer Hüftumfang 	50–59 (19 1/2–23 1/4)	XXS	XXS	XXS	XS
	60–69 (23 1/2–27 1/4)	XXS	XXS	XS	XS
	70–80 (27 1/2–31 1/2)	XXS	XXS	XS	S
	81–100 (31 3/4–39 1/2)	XXS	XS	S	S

Hängematten-Gurte


Größentabelle

Gurtmodelle
THA6i, THAi

Oberkante des Kopfes bis Steißbein

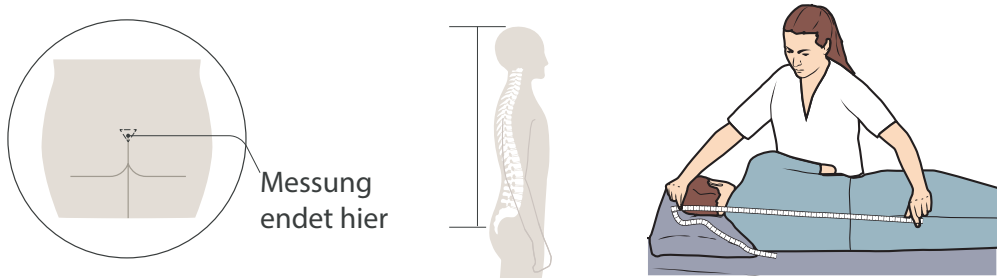

Unterer Hüftumfang

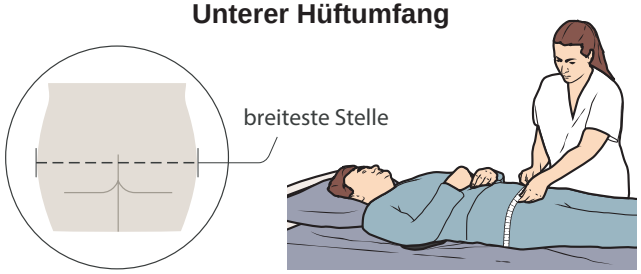


cm (in)	40–45 (16–17,5)	46–52 (18–20,5)	53–66 (21–26)	67–81 (26,5–32)	82–90 (32,5–35,5)	91–100 (36–40)
55–70 (21,5–27,5)	XXS	XS	S	M	L	XL
71–80 (28–31,5)	XS	XS	S	M	L	XL
81–99 (37–41,5)	S	S	S	M	L	XL
100–120 (39,5–47)	M	M	M	M	L	XL
121–135 (47,5–53)	L	L	L	L	L	XL
136–155 (53,5–61)	XL	XL	XL	XL	XL	XL

TIR-Gurt

Größentabelle

Gurtmodell
TIR

Unterer Hüftumfang

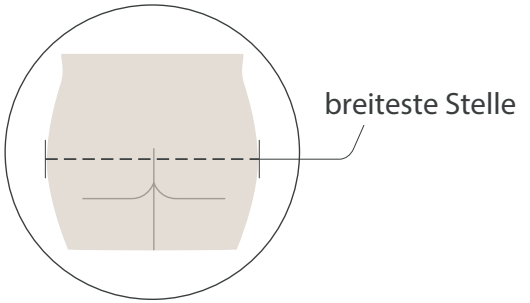




cm (in)		
85–119 (33,5–47)	120–139 (47–55)	140–166 (55–65,5)
S	M	L

Clipgurte für beidseitig Beinamputierte


Größentabelle

Gurtmodelle
MAA2050M, MAA2080M, MAA2090M, MAA2091M, MAA4040M, MAA7090M

Messung Oberkante des Kopfes bis Steißbein

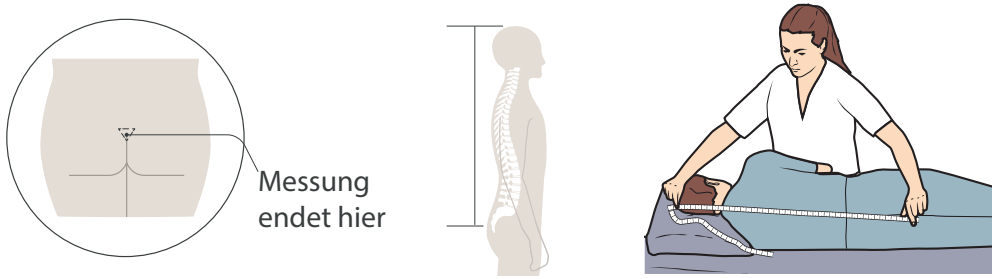

Unterer Hüftumfang

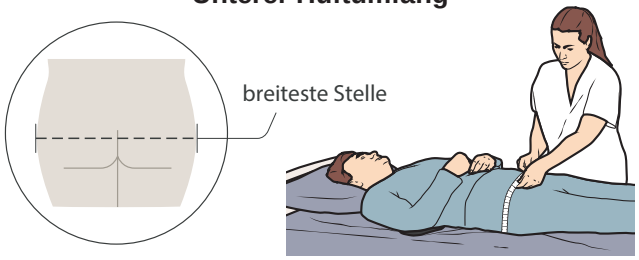

cm (in)	60–65 (23,5–25,5)	66–73 (26–29)	74–81 (29–32)	82–89 (32,5–35)	90–95 (35,5–37,5)	96–103 (38–40,5)
70–80 (27,5–31,5)	XS	S	M	L	LL	XL
81–93 (32–36,5)	S	S	M	L	LL	XL
94–106 (37–41,5)	M	M	M	LL	LL	XL
107–125 (42–49)	M	L	L	LL	XL	XL
126–136 (49,5–53,5)	L	LL	LL	LL	XL	XL
137–155 (54–61)	XL	XL	XL	XL	XL	XXL
156–220 (61,5–86,5)	/	/	XXL	XXL	XXL	XXL


Clipgurte für einseitig Beinamputierte

Größentabelle


Gurtmodelle

MAA4070M, MAA4080M

Oberkante des Kopfes bis Steißbein

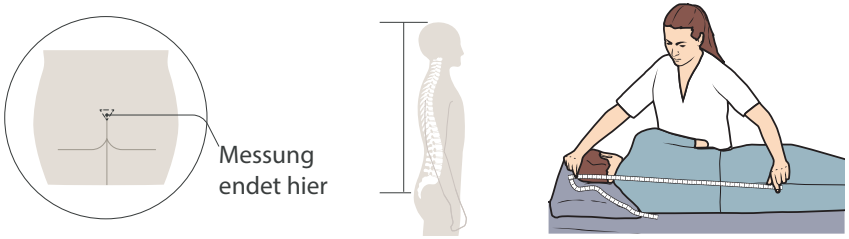

Körperformtyp ermitteln

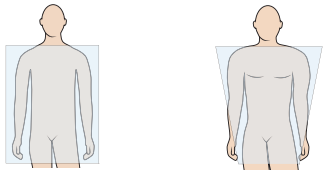

Oder



Schulterumfang



cm (in)	65–70 (25,5–27,5)	71–75 (28–29,5)	76–82 (30–32,5)	83–90 (32,5–35,5)	91–105 (36–41,5)
80–99 (31,5–39)	M	M	M	L	LL
100–114 (39,5–45)	M	M	L	LL	LL
115–130 (45,5-51)	L	L	L	LL	XL
131–149 (51,5–59)	LL	LL	LL	LL	XL
150–170 (59–67)	XL	XL	XL	XL	XL

Unterer Hüftumfang



cm (in)	65–70 (25,5–27,5)	71–75 (28–29,5)	76–82 (30–32,5)	83–90 (32,5–35,5)	91–105 (36–41,5)
80–95 (31,5–37,5)	M	M	M	L	LL
96–112 (38–44)	M	M	L	LL	LL
113–129 (44,5–51)	L	L	L	LL	XL
130–145 (51–57)	LL	LL	LL	LL	XL
146–166 (57,5–65,5)	XL	XL	XL	XL	XL

Hängemattengurt für Amputierte

Größentabelle

Gurtmodell
MLA7000

Schulterumfang			
			
cm (in)			
80–120 (31,5–47)	105–125 (41,5–49)	110–130 (43,5–51)	120–140 (47–55)
S	M	L	XL


Bariatrische Gurte


Größentabelle



Messung

Unterer Hüftumfang

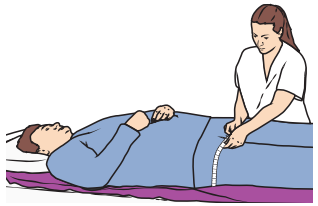

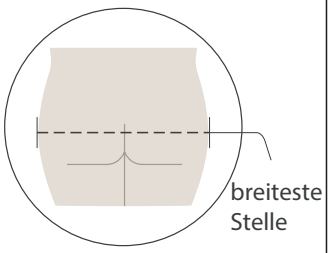


Gurtmodelle	cm (in)	72–79 (28 3/8–31 1/4)	80–85 (31 1/2–33 1/2)	86–93 (33 3/4–36 3/4)	94–105 (37–41 1/4)	106–115 (41 1/2–45 1/4)
MAA8000 MAA8010 MFA8010	170–179 (66 7/8–70 1/2)	M	M	M	L	XL
	180–189 (70 3/4–74 1/2)	M	M	L	XL	XXL
	190–199 (74 3/4–78 1/2)	M	L	XL	XL	XXL
	200–209 (78 3/4–82 1/4)	L	XL	XL	XXL	XXL
	210–219 (82 1/2–86 1/4)	XL	XL	XL	XXL	/

Gurtmodelle	cm (in)	67–81 (26 3/8–32)	82–90 (32 1/4–35 1/2)	91–100 (35 3/4–39 1/2)	101–110 (39 3/4–43 1/4)	111–120 (43 1/2–47 1/4)
MAA8020 MAA8030	155–164 (61–64 3/4)	M	L	XL	XL	XXL
	165–179 (65–70 1/2)	L	L	XL	XL	XXL
	180–194 (70 3/4–76 1/2)	L	L	XL	XL	XXL
	195–209 (76 3/4–82 1/4)	XL	XL	XL	XXL	XXL
	210–219 (82 1/2–86 1/4)	XL	XL	XXL	XXL	/

Steh- und Gehgurte für den Transfer

Größentabelle

Taillenumfang


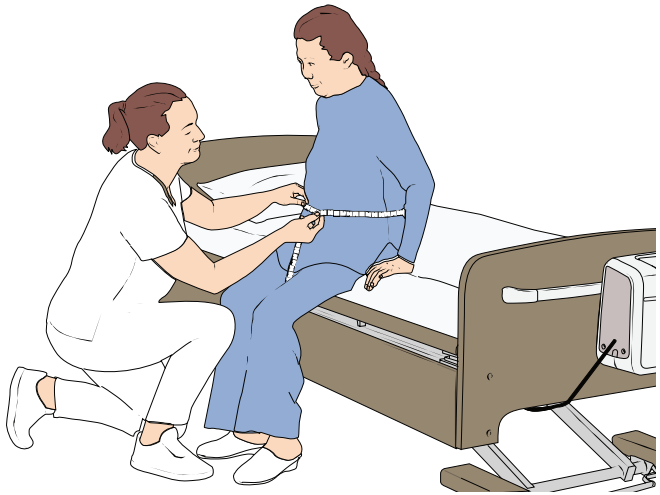


		S	M	L	XL	XXL	Einheits-größe
		cm (in)					
Gurtmodelle	**TSS.500-504**	69–86 (27–34)	84–113 (33–44,5)	107–156 (42–61,5)	157–184 (62–72,5)	173–201 (68–79)	/
	TSS.500-503S-1C	63–130 (25–51)	89–130 (35–51)	91–133 (36–52,5)	104–160 (41–63)	/	/
	KKA5120, KKA5370, KKA5130M	70–97 (27,5–38)	98–117 (38,5–46)	118–137 (46,5–54)	138–169 (54,5–66,5)	/	/
	KKA6000, TSS.500W-TSS503W	69–86 (27–34)	84–110 (33–43,5)	100–135 (39,5–53)	120–160 (47–63)	/	/
	MFA3000, MFA4000	/	/	/	/	/	80–125 (31,5–49)
	MAA3071	/	/	/	/	/	60–130 (23,5–51)

Schlaufen-Gehgurt

Größentabelle


Gurtmodelle
MFA5100, MFA5200, MFA5210, MLA5100, MLA5200, MLA5210

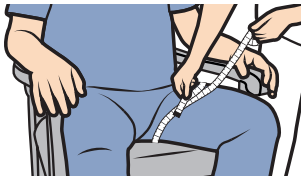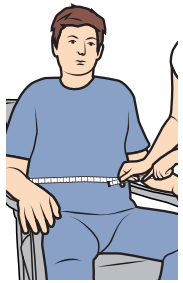
		Oberschenkelumfang 			
	cm (in)	40–51 (15,5-20)	52–64 (20,5–25)	65–79 (25,5-31)	80–100 (31,5-39)
	65-79 (25,5-31)	S	S	/	/
Taillenumfang 	80–99 (31,5–39)	S	M	M	/
	100-122 (39,5-48)	/	M	L	L
	123-160 (48,5-63)	/	/	XL	XL
				65–105 (25,5–41,5	95–135 (37,5–53)
	123-208 (48,5-82)	/	/	XXL	XXL Beinverlängerung

Liegegurte

Größentabelle

Gurtmodelle	MAA1150, MAA1151, MAA1152
	MFA5000

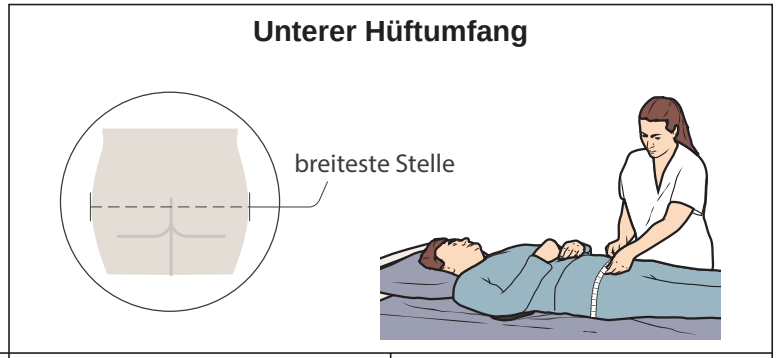

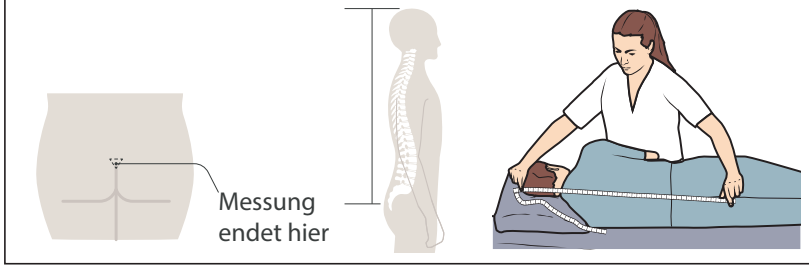

cm (in)	Maximal 130 (51)	Maximal 170 (67)
Maximal 81 (32)	L	XL
Maximal 90 (35,5)	/	Einheitsgröße

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
EMPOWERING MOVEMENT