

TECHNISCHER REFERENZLEITFADEN

# Gurte und Gleitmatten

EMPOWERING MOVEMENT

Seite absichtlich leer gelassen

Design-Richtlinie und Urheberrecht

® und ™ sind Marken der Arjo Unternehmensgruppe.
© Arjo – Januar 2024.

Da kontinuierliche Verbesserung unser Firmengrundsatz ist, behalten wir uns das Recht vor, Designs ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Der Nachdruck dieser Schrift, auch auszugsweise, ist ohne die Genehmigung von Arjo verboten.

# Inhalt

## GURTE


Einleitung . . . 9
Arjo-Gurte online suchen . . . 10
Gurt-Stoffoptionen . . . 11
Erklärung der Piktogramme . . . 14


### Körpergurte für den Sitztransfer . . . 15


Körpergurte für den Sitztransfer . . . 17
Clipgurt – ungepolstertes Beinteil . . . 18
Clipgurt – gepolstertes Beinteil . . . 18
Clipgurt – gepolstertes Beinteil und Beinverlängerung . . . 19
Clip-Badegurt – ungepolstertes Beinteil . . . 19
Clip-Badegurt – gepolstertes Beinteil . . . 20
Clip-Badegurt – ungepolstertes Beinteil und Beinverlängerung . . . 20
In-situ-Clipgurt – ungepolstertes Beinteil . . . 21
In-situ-Clip-Badegurt – ungepolstertes Beinteil . . . 21
Clip-Komfortgurt – gepolstertes Beinteil . . . 22
Clip-Toilettengurt – gepolstertes Beinteil . . . 22
Schlaufengurt – gepolstertes Beinteil . . . 23
Schlaufengurt – gepolstertes Beinteil, ohne Kopfunterstützung . . . 23
Schlaufen-Badegurt – ungepolstertes Beinteil . . . 24
In-situ-Schlaufengurt – gepolstertes Beinteil . . . 24
Schlaufen-Toilettengurt – gepolstertes Beinteil . . . 25
Schlaufen-Toilettengurt – gepolstertes Beinteil, ohne Kopfunterstützung . . . 25
Schlaufen-Hängematttengurt – 6 Befestigungsbänder . . . 26
Schlaufen-Hängematttengurt – 4 Befestigungsbänder . . . 26
Schlaufen-Quick-Fit-Gurt – ohne Kopfstütze . . . 27
Einweg-Clipgurt . . . 27
Einweg-Schlaufengurt . . . 28
Bariatrischer Schlaufen-Komfortgurt . . . 28
Bariatrischer Schlaufengurt . . . 29
Bariatrischer Schlaufen-Hängematttengurt – geteiltes Beinteil . . . 29
Bariatrischer Schlaufen-Hängematttengurt . . . 30
Bariatrischer Einweg-Schlaufengurt . . . 30
Clipgurt für Beinamputierte . . . 31
Clipgurt für Beinamputierte mit Klettverschluss . . . 31
Clipgurt für rechtsseitig Beinamputierte . . . 32
Clipgurt für linksseitig Beinamputierte . . . 32
Clip-Badegurt für Beinamputierte . . . 33
Schlaufen-Hängematttengurt für Beinamputierte . . . 33
In-situ-Clipgurt für Beinamputierte . . . 34
In-Situ-Clip-Badegurt für Beinamputierte . . . 34
Clip-Toilettengurt für Beinamputierte . . . 35
Kinder-Clipgurt . . . 35


### Stehhilfe- und Gehgurte . . . 37


Gurte für Steh- und Aufrichthilfen . . . 39
Mobilisierungsgurte für Deckenlifter und Passiv-Bodenlifter 39
Sara Flex Stehgurt . . . 40
Sara Flex Stehgurt – separater Gurt mit einem Clip . . . 40
Sara Flex Sitz-Transfergurt . . . 41
Sara Clip-Stehgurt, flach . . . 41
Sara Flex Einweg-Stehgurt . . . 42
Sara Flex abwischbarer Stehgurt . . . 42
Sara Plus Stehgurt . . . 43
Sara Plus Stehgurt – mit Gesäßunterstützung (EPS, extra postural support) . . . 43
Sara Plus Einweg-Stehgurt . . . 44
Sara Plus abwischbarer Stehgurt . . . 44
Sara Plus Gehgurt . . . 45
Schlaufen-Gehgurt . . . 45
Schlaufen-Gehweste . . . 46


### Körpergurte für den Transfer im Bett und für Liegendtransfers (lateral, seitlich) . . . 47


Körpergurte für den Transfer im Bett und für Liegendtransfers . . . 49
Schlaufen-Liegegurt – mit Pflegeöffnung . . . 50
Schlaufen-Liegegurt . . . 50
Schlaufen-Badeliegegurt – mit Pflegeöffnung . . . 51
Einweg-Schlaufen-Liegegurt . . . 51
Gurtliege . . . 52
Schlaufen-Positionierungsgurt . . . 52
Schlaufen-Komfort-Positionierungsgurt . . . 53
Einweg-Schlaufen-Positionierungsgurt . . . 53
Bariatrischer Schlaufen-Positionierungsgurt . . . 54
Bariatrischer Einweg-Schlaufen-Positionierungsgurt . . . 54
Extremitäten-Clipgurt . . . 55
Schlaufen-Extremitätengurt . . . 55
Bariatrischer Schlaufen-Extremitätengurt . . . 56
Schlaufen-Wendegurt . . . 56
Einweg-Clip-Extremitätengurt . . . 57
Einweg-Schlaufen-Extremitätengurt . . . 57
Einweg-Schlaufen-Wendegurt . . . 58


## GLEITMATTEN


Arjo Gleitmatten . . . 63
Arjo Gleitröhren . . . 65
Arjo Gleitmatten-Sets . . . 67
Arjo Einweg-Gleitmatten und -röhren . . . 69


CPR

# Körpergurte





# Einführung

Der technische Referenzleitfaden für Gurte bietet eine vollständige Übersicht über das Sortiment der Gurte von Arjo. Die Zuordnung des richtigen Körpergurts für den jeweiligen Patienten-/Bewohnertyp und seine individuellen Bedürfnisse ist entscheidend, um optimale Sicherheit und Komfort zu gewährleisten.

Sie finden Beschreibungen zu jedem Produkt sowie Bilder und technische Daten. Ganz gleich, ob Sie in einem Krankenhaus oder Pflegeheim arbeiten, unsere Gurte erfüllen die höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards für Ihre Anforderungen. Vielen Dank, dass Sie sich für Arjo entschieden haben.

# Arjo-Gurte online suchen

## Arjo.com


Im Abschnitt Gurte auf arjo.com finden Sie mit diesem Dokument vergleichbare Informationen, einschließlich detaillierter Beschreibungen der einzelnen Produkte sowie Bilder und Spezifikationen. Die Bedienungsanleitung und Marketingmaterialien stehen ebenfalls zum Download bereit.

Auf der Startseite stehen mehrere Filteroptionen zur Verfügung, um die einfache und intuitive Suche nach einem bestimmten Gurt oder einer Gruppe von Gurten zu unterstützen. Diese umfassen:

- Liftsysteme – Steh- und Aufrichthilfen oder Deckenlifter und Passiv-Bodenlifter
- Kompatible Lifter – Maxi Sky, Maxi Move usw.
- Befestigungsoptionen – Clip oder Schlaufe
- Patientenmerkmale – Allgemein, bariatrisch usw.
- Pflegetätigkeit – Toilettengang, Baden, Liegendtransfer (lateral, seitlich) usw.
- Stoffoptionen – Netzgewebe, Einweg usw.
- Erweiterte Anwendung – Bodenaufnahme, Bauchlagerung usw.

## Suchmaschinen

Wenn Sie den Namen oder die Artikelnummer eines bestimmten Arjo-Gurts kennen und weitere Informationen erhalten möchten, verwenden Sie einfach den Namen oder die Nummer als Suchbegriff. In den meisten Fällen finden Sie den Gurt oben in Ihrem Suchergebnis mit einem direkten Link zur spezifischen Produktseite auf arjo.com.

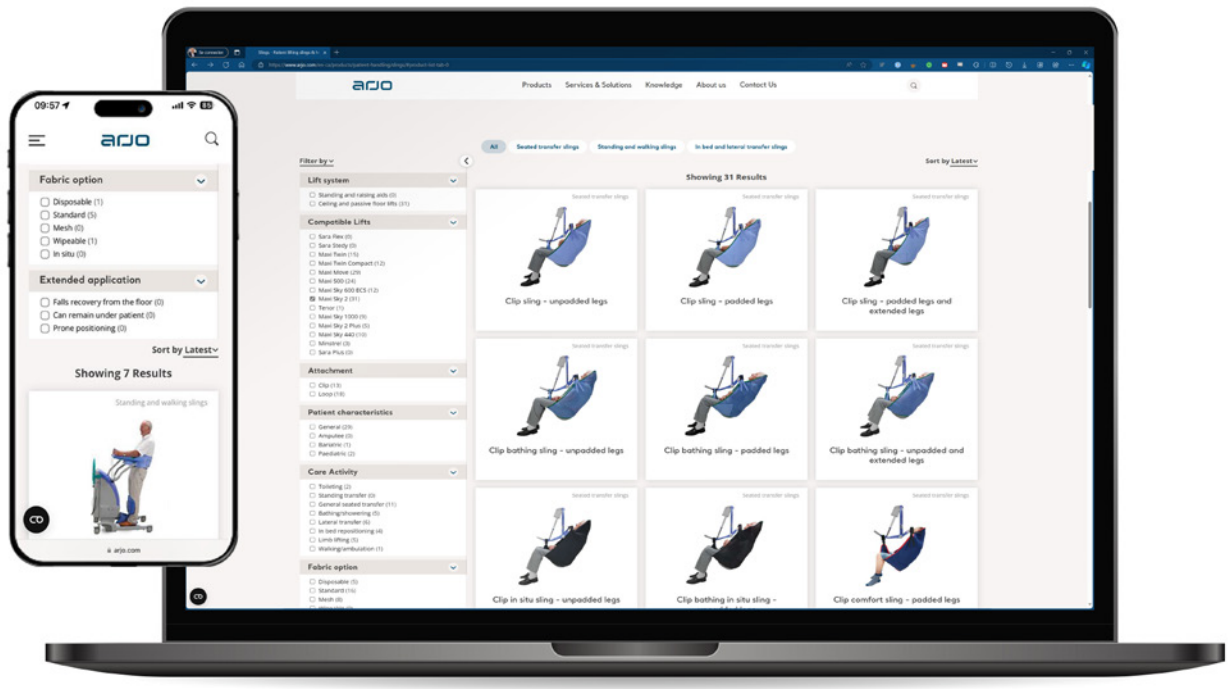


Webseite besuchen

# Gurt-Stoffoptionen



## Waschbarkeit

- Hohe Strapazierfähigkeit und große Auswahl an Gurtmodellen.
- Die vollständigen Reinigungsempfehlungen und -anweisungen finden Sie auf dem Gurtetikett und in der Bedienungsanleitung.



## Einwegprodukt für den patientenspezifischen Gebrauch


- Ist bei Verschmutzung oder am Ende des Aufenthalts des Patienten zu entsorgen.
- Erfüllt die Anforderungen an den Infektionsschutz.
- Eine problemlose Lösung, da Waschen nicht erforderlich ist.



## Abwischbar

- Kann zwischen der Nutzung durch unterschiedliche Pflegebedürftige gereinigt und desinfiziert werden.
- Minimierte Ausfallzeiten, da sie nach dem Abwischen sofort für den Einsatz beim nächsten Bewohner/Patienten verfügbar sind.


## WASCHBAR

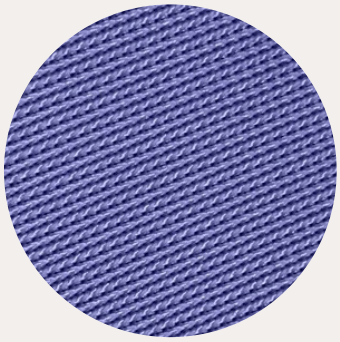


### Gestricktes Polyestergewebe

- Allzweckmaterial.
- Strapazierfähiges und starkes Material für tägliche Transfers.



weiß

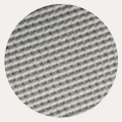

grau

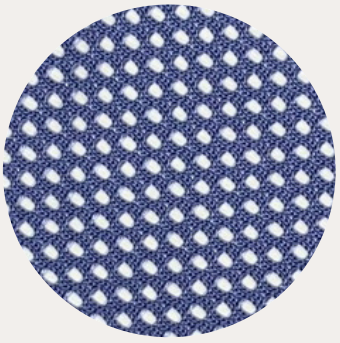

### Gestricktes Polyestergewebe – Netzgewebe

- Strapazierfähiges und starkes Material für tägliche Transfers.
- Ideal zum Duschen oder Baden; das Netzgewebe ermöglicht eine optimale Wasserverteilung.

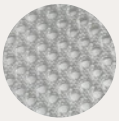
weiß

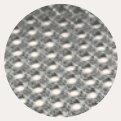
grau



### Premium-Strickgewebe aus Polyester

- Weicherer Stoff für zusätzlichen Komfort.
- Strapazierfähiges und starkes Material für tägliche Transfers.



### Hochfestes Baumwoll-Polyestergewebe

- Erhältlich bei bariatrischen Positionierungsgurten.



### Polyestergewebe (in-situ)

- Kann für einen Zeitraum zwischen den Transfers unter dem Pflegebedürftigen belassen werden.*
- Atmungsaktiv
- Leitet Wärme ab
- Dezent drapierbar
- Antistatisch


Hellblau




### Leichtes gestricktes Polyestergewebe – Netzgewebe

- Weicherer Stoff für zusätzlichen Komfort.
- Strapazierfähiges und starkes Material für tägliche Transfers.
- Kann für einen Zeitraum zwischen den Transfers unter dem Pflegebedürftigen belassen werden.*

*Es sollte immer eine Beurteilung durch eine Pflegekraft erfolgen, bevor ein Gurt zwischen den Transfers unter einem Pflegebedürftigen gelassen wird.

## EINWEGARTIKEL

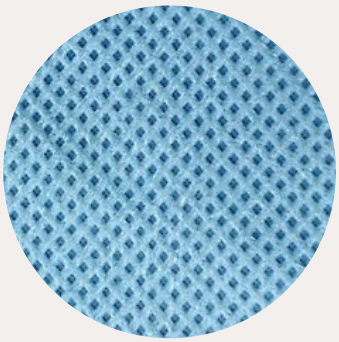


### Polypropylenvlies

- Die patientenbezogene Einweg-Option begrenzt die Ausbreitung von Infektionen und verbessert den Infektionsschutz.



### Gewebtes Baumwoll-Polyestergewebe

- Die patientenbezogene Einweg-Option begrenzt die Ausbreitung von Infektionen und verbessert den Infektionsschutz.

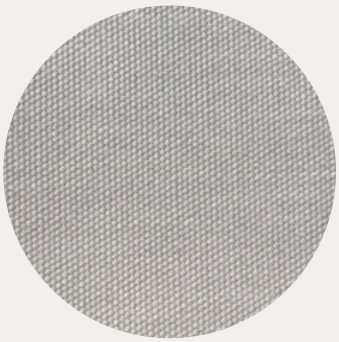

### Hochfestes Baumwoll-Polyestergewebe


- Die patientenbezogene Einweg-Option begrenzt die Ausbreitung von Infektionen und verbessert den Infektionsschutz.
- Für bariatrische Anwendungen.



### Stitch-Bond-Polypropylenvlies

- Die für Einzelpatienten konzipierte Einweg-Option begrenzt die Ausbreitung von Infektionen und verbessert den Infektionsschutz.
- Verstärkter Vliesstoff, geeignet für Gurte mit höherer sicherer Arbeitslast (SWL)

## ABWISCHBAR

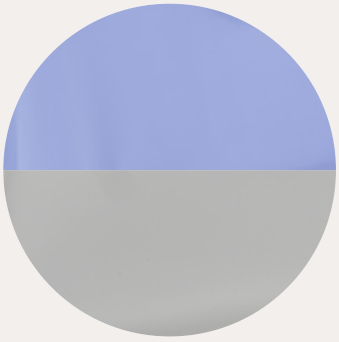

### Polyurethanbeschichtete Webware

- Zum Abwischen zwischen verschiedenen Patienten/Bewohnern, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

# Erklärung der Piktogramme

## Morphologie


Allgemeine Anwender


Amputierte Personen


Kinder


Bariatrische Personen

## Reinigungsverfahren


Nicht waschbar



Waschbar bei max. 70 °C



Waschbar bei max. 80 °C


Nicht im Wäschetrockner trocknen


Kann bei niedrigen Temperaturen im Wäschetrockner getrocknet werden

# Körpergurte für den Sitztransfer





# Körpergurte für den Sitztransfer

Ein breites Sortiment an Körpergurten für jeden Patienten-/Bewohnertyp und Bedarf. Zur Verwendung mit Passivliftern zum Transfer von Pflegebedürftigen in sitzender Position in und aus dem Bett, zum Stuhl, ins Badezimmer, zum Rollstuhl und für die Bodenaufnahme.

### Befestigungsmethoden
- Clipbefestigung
- Schlaufenenden

### Verfügbare Materialien
- Gestricktes Polyestergewebe (blau und weiß)
- Gestricktes Polyester-Netzgewebe (blau, grau und weiß)
- Premium-Polyestergewebe (schwarz)
- Leichtes Polyestergewebe
- Polypropylenvlies

### Morphologien
- Kinder
- Allgemeine Anwender
- Amputierte Personen
- Bariatrische Personen

### Optionen
- Mit oder ohne Kopfunterstützung
- Gepolsterte Beinteile, ungepolsterte Beinteile oder Beinverlängerungen

### Hauptsächliche Aktivitäten
- Transfer und Heben von Patienten in sitzender Position
- Toilettengang
- Baden/Duschen
- Positionierung
- Aufnahme eines Pflegebedürftigen vom Boden

# CLIPGURT – UNGEPOLSTERTES BEINTEIL

Der Clipgurt mit ungepolstertem Beinteil wird für alltägliche Hebe- und Transfervorgänge verwendet, z. B. für Transfers in und aus dem Bett bzw. (Roll-)Stuhl.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | **MAA2000M** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)

SITZTRANSFER > ALLGEMEINE ANWENDER > CLIPGURT

# CLIPGURT – GEPOLSTERTES BEINTEIL

Der Clipgurt mit gepolstertem Beinteil wird für eine Reihe von alltäglichen Hebe- und Transfervorgängen verwendet, z. B. Transfers in und aus dem Bett bzw. (Roll-)Stuhl. Die Beinteile sind zusätzlich gepolstert – für mehr Komfort.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | **MAA4000M** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)

# CLIPGURT – GEPOLSTERTES BEINTEIL UND BEINVERLÄNGERUNG

Der Clipgurt mit gepolstertem Beinteil und Beinverlängerung wird für eine Reihe von alltäglichen Hebe- und Transfervorgängen verwendet, z. B. für den Transfer von Pflegebedürftigen in und aus dem Bett oder von und auf einen Stuhl. Die Beinteile sind zusätzlich gepolstert – für mehr Komfort. Der Gurt mit verlängertem Beinteil eignet sich für Personen, bei denen um die Oberschenkel herum ein größerer Umfang benötigt wird.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | **MAA4100M** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)



# CLIP-BADEGURT – UNGEPOLSTERTES BEINTEIL

Der Clip-Badegurt mit ungepolstertem Beinteil ist für das Baden und Duschen geeignet, da das Netzmaterial das Ablaufen des Wassers durch den Gurt ermöglicht.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA4060M** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyestergewebe – Netzgewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)

# CLIP-BADEGURT – GEPOLSTERTES BEINTEIL

Der Clip-Badegurt mit gepolstertem Beinteil ist für das Baden und Duschen geeignet, da das Netzmaterial das Ablaufen des Wassers durch den Gurt ermöglicht. Die Beinteile sind zusätzlich gepolstert – für mehr Komfort.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA4061M** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyestergewebe – Netzgewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)



# CLIP-BADEGURT – UNGEPOLSTERTES BEINTEIL UND BEINVERLÄNGERUNG

Der Clip-Badegurt mit ungepolstertem Beinteil und Beinverlängerung ist zum Baden und Duschen geeignet, da das Netzmaterial das Ablaufen des Wassers durch den Gurt ermöglicht. Der Gurt mit verlängertem Beinteil eignet sich für Personen, bei denen um die Oberschenkel herum ein größerer Umfang benötigt wird.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA4160M** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe [1] | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyestergewebe – Netzgewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)

# IN-SITU-CLIPGURT – UNGEPOLSTERTES BEINTEIL

Der In-situ-Clipgurt – ungepolsterter Beinbereich wird für alltägliche Hebe- und Transfervorgänge verwendet, z. B. für Transfers in und aus dem Bett bzw. (Roll-)Stuhl. Er kann zwischen den Transfers unter dem Pflegebedürftigen belassen werden (sofern die klinische Beurteilung dies zulässt).



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA2040M** |
| Sichere Arbeitslast | 190 kg (418 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyestergewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)



# IN-SITU-CLIP-BADEGURT – UNGEPOLSTERTES BEINTEIL

Der In-situ-Clip-Badegurt mit ungepolstertem Beinteil ist für das Baden und Duschen geeignet, da das Netzmaterial das Ablaufen des Wassers durch den Gurt ermöglicht.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA2070M** |
| Sichere Arbeitslast | 190 kg (418 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Leichtes Polyestergewebe – Netzgewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)

# CLIP-KOMFORTGURT – GEPOLSTERTER BEINBEREICH

Der Clip-Komfortgurt – gepolsterter Beinbereich wird für alltägliche Hebe- und Transfervorgänge verwendet, z. B. für Transfers in und aus dem Bett bzw. (Roll-)Stuhl. Mit zusätzlicher Polsterung für die Beine und ohne Einfassungen im Hauptteil bietet der gesamte Gurt optimalen Komfort.

| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA4050M** |
| Sichere Arbeitslast | 228 kg (500 lbs) |
| Größe | ~~XS~~ S M L LL XL ~~XXL~~ |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Premium Polyestergewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)





# CLIP-TOILETTENGURT – GEPOLSTERTER BEINBEREICH

Der Clip-Toilettengurt –gepolsterter Beinbereich ist ein speziell für den Toilettengang und das An- und Auskleiden von Pflegebedürftigen entwickelter Gurt.

| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA4031M** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)



# SCHLAUFENGURT – GEPOLSTERTES BEINTEIL

Der Schlaufengurt mit gepolstertem Beinteil wird für alltägliche Hebe- und Transfervorgänge verwendet, z. B. für Transfers in und aus dem Bett bzw. (Roll-)Stuhl. Die Beinteile sind zusätzlich gepolstert – für mehr Komfort.

| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MLA2000** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi 500
- Maxi Twin
- Maxi Move
- Minstrel

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 440
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)





# SCHLAUFENGURT – GEPOLSTERTES BEINTEIL, OHNE KOPFSTÜTZE

Der Schlaufengurt mit gepolstertem Beinteil ohne Kopfstütze bietet ein anderes Design mit niedrigem Rückenteil, bei dem die Arme des Pflegebedürftigen außerhalb des Gurts bleiben können und keine Kopfstütze erforderlich ist.

| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MLA3000** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi 500
- Maxi Twin
- Maxi Move

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 440
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)



# SCHLAUFEN-BADEGURT – UNGEPOLSTERTE BEINTEILE

Der Schlaufen-Badegurt mit ungepolstertem Beinteil ist für Bade- und Duschaktivitäten geeignet, da das Netzmaterial das Ablaufen des Wassers durch den Gurt ermöglicht.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MLA4060** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyestergewebe – Netzgewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi 500
- Maxi Twin
- Maxi Move
- Minstrel

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 440
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)



# IN-SITU-SCHLAUFENGURT – GEPOLSTERTES BEINTEIL

Der In-Situ-Schlaufengurt mit gepolstertem Beinteil wird für alltägliche Hebe- und Transfervorgänge verwendet, z. B. für Transfers in und aus dem Bett bzw. (Roll-)Stuhl. Er kann zwischen den Transfers unter dem Pflegebedürftigen belassen werden (sofern die klinische Beurteilung dies zulässt).



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MLAAS2000** |
| Sichere Arbeitslast | 190 kg (418 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Gewebtes Polyestergewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi 500
- Maxi Twin
- Maxi Move
- Minstrel

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 440
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)

# SCHLAUFEN-TOILETTENGURT – GEPOLSTERTES BEINTEIL

Unser Schlaufen-Toilettengurt mit gepolstertem Beinteil ist ein spezieller Gurt für den Toilettengang sowie das An- und Auskleiden des Pflegebedürftigen.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MLA4031** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi 500
- Maxi Twin
- Maxi Move
- Minstrel

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 440
- Maxi Sky 600
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)



# SCHLAUFEN-TOILETTENGURT – GEPOLSTERTES BEINTEIL, OHNE KOPFSTÜTZE

Unser Schlaufen-Toilettengurt mit gepolstertem Beinteil und ohne Kopfstütze ist ein spezieller Gurt für den Toilettengang sowie das An- und Auskleiden des Pflegebedürftigen. Das Design mit niedrigem Rückenteil erleichtert das Anlegen und Abnehmen des Gurts. Er ist für Pflegebedürftige geeignet, die ihren Kopf beim Transfer selbstständig stützen können.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MLA4531** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi 500
- Maxi Twin
- Maxi Move
- Minstrel

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 440
- Maxi Sky 600
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)

# SCHLAUFEN-HÄNGEMATTENGURT – 6 BEFESTIGUNGSBÄNDER*

Der Schlaufen-Hängemattengurt – 6 Befestigungsbänder ist ein Allzweckgurt, der Kopf und Nacken vollständig stützt und mit doppelter Polsterung im Oberschenkelbereich für Komfort sorgt. Die zusätzlichen Befestigungsbänder bieten dem Patienten/Bewohner mehr Halt. Dieser Gurt besteht aus einem schnelltrocknenden Netzgewebe, weshalb er ideal für das Baden und allgemeine Transfers geeignet ist.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **THA6i** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XXS XS S M L LL XL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 80 |
| Material | Polyestergewebe – Netzgewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Maxi Move<br>• Maxi 500 | • Maxi 440<br>• Maxi Sky 2<br>• Maxi Sky 1000<br>• Maxi Sky 2 Plus |

* nicht in allen Ländern verfügbar



# SCHLAUFEN-HÄNGEMATTENGURT – 4 BEFESTIGUNGSBÄNDER*

Der Schlaufen-Hängemattengurt – 4 Befestigungsbänder ist ein Allzweckgurt, der Kopf und Nacken vollständig stützt und mit doppelter Polsterung im Oberschenkelbereich für Komfort sorgt. Dieser Gurt besteht aus einem schnelltrocknenden Netzgewebe, weshalb er ideal für das Baden und allgemeine Transfers geeignet ist.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **THAI** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 80 |
| Material | Polyestergewebe – Netzgewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Maxi 500<br>• Maxi Twin<br>• Maxi Move | • Maxi Sky 440<br>• Maxi Sky 2-Serie<br>• Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus) |

* nicht in allen Ländern verfügbar

# SCHLAUFEN-QUICK-FIT-GURT – OHNE KOPFSTÜTZE*

Der Schlaufen-Quick-Fit-Gurt – ohne Kopfstütze ist ein Allzweckgurt. Er dient zur Übernahme der Patienten/Bewohner vom Bett, Rollstuhl und vom Boden. Dieser Gurt kann für Patienten/Bewohner mit einer eingeschränkten Funktionsfähigkeit des Oberkörpers genutzt werden. Die Person muss jedoch über eine gute Kopfkontrolle verfügen, da der Gurt keine Kopfunterstützung bietet.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **TIR** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 80 |
| Material | Polyestergewebe – Netzgewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Maxi 500<br>• Maxi Twin<br>• Maxi Move | • Maxi Sky 440<br>• Maxi Sky 2-Serie<br>• Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus) |

* nicht in allen Ländern verfügbar



# EINWEG-CLIPGURT:

Der Einweg-Clipgurt wird für eine Reihe von Hebe- und Transfervorgängen verwendet, z. B. Transfers in und aus dem Bett bzw. (Roll-)Stuhl. Er ist so konzipiert, dass er einen Patienten während seines gesamten Krankenhausaufenthalts begleitet. Er wird auf die gleiche Weise verwendet wie ein Standard-Clipgurt, kann jedoch nicht gewaschen werden.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MFA1000M** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| | Lieferung in Packungen mit 10 Gurten |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | Einwegprodukt für den patientenspezifischen Gebrauch |
| Material | Polypropylen-Vliesstoff |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Maxi Move<br>• Maxi Twin<br>• Maxi Twin Compact<br>• Maxi 500 | • Maxi Sky 2-Serie<br>• Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus) |

# EINWEG-SCHLAUFENGURT

Der Einweg-Schlaufengurt wurde entwickelt, um die Infektionsprophylaxe zu unterstützen, sichere Hebe- und Transfervorgänge zu etablieren und das Wohlbefinden der Pflegebedürftigen zu steigern. Er ist immer einsatzbereit – eine Wiederaufbereitung ist nicht erforderlich.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MFA2100** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| | Lieferung in Packungen mit 10 Gurten |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | Einwegprodukt für den patientenspezifischen Gebrauch |
| Material | Polypropylen-Vliesstoff |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Maxi 500<br>• Maxi Twin<br>• Maxi Move<br>• Minstrel | • Maxi Sky 440<br>• Maxi Sky 600<br>• Maxi Sky 2-Serie<br>• Maxi Sky 2 Plus |



# BARIATRISCHER SCHLAUFEN-KOMFORTGURT

Der bariatrische Schlaufen-Komfortgurt ist für den assistierten Transfer von schwergewichtigen Pflegebedürftigen geeignet, deren gesamter Körper beim Transfer gestützt werden muss. Für optimalen Komfort ist er mit einer zusätzlichen Polsterung an den am stärksten beanspruchten Stellen ausgestattet.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA8000** |
| Sichere Arbeitslast | 454 kg (1000 lbs) |
| Größe [1] | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Tenor | • Maxi Sky 1000<br>• Maxi Sky 2 Plus |

# BARIATRISCHER SCHLAUFENGURT

Der bariatrische Schlaufengurt ist für den assistierten Transfer von schwergewichtigen Pflegebedürftigen geeignet, deren gesamter Körper beim Transfer gestützt werden muss. Die Beinteile sind standardmäßig gepolstert, was den Komfort für den Pflegebedürftigen verbessert.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA8010** |
| Sichere Arbeitslast | 454 kg (1000 lbs) |
| Größe | XS S **M** **L** LL **XL** **XXL** |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Tenor | • Maxi Sky 1000<br>• Maxi Sky 2 Plus |



# BARIATRISCHER SCHLAUFEN-HÄNGEMATTENGURT – GETEILTES BEINTEIL

Der bariatrische Schlaufen-Hängemattengurt – geteiltes Beinteil ist für den assistierten Transfer von schwergewichtigen Pflegebedürftigen geeignet, deren gesamter Körper beim Transfer gestützt werden muss. Der Gurt bietet zusätzlichen Halt im Beinbereich – die Beine werden einzeln gestützt, um Abduktion oder Adduktion zu vermeiden. Außerdem bietet er mehr Platz im Bauchbereich.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA8020** |
| Sichere Arbeitslast | 454 kg (1000 lbs) |
| Größe | XS S **M** **L** LL **XL** **XXL** |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester Netzgewebe Cache-Blue |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Tenor | • Maxi Sky 1000<br>• Maxi Sky 2 Plus |

# BARIATRISCHER SCHLAUFEN-HÄNGEMATTENGURT

Der bariatrische Schlaufen-Hängemattengurt ist für den assistierten Transfer von schwergewichtigen Pflegebedürftigen geeignet, deren gesamter Körper beim Transfer gestützt werden muss. Er ist für Transfers von Patienten in halb liegender Position vorgesehen, die keine zwischen den Beinen angebrachten Beingurte vertragen.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA8030** |
| Sichere Arbeitslast | 454 kg (1000 lbs) |
| Größe | XS S **M** **L** LL **XL** **XXL** |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester Netzgewebe Cache-Blue |


**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Tenor | • Maxi Sky 1000<br>• Maxi Sky 2 Plus |



# BARIATRISCHER EINWEG-SCHLAUFENGURT

Der bariatrische Einweg-Schlaufengurt ist für den assistierten Transfer von schwergewichtigen Pflegebedürftigen geeignet, deren gesamter Körper beim Transfer gestützt werden muss. Er ist dafür konzipiert, Pflegebedürftige während ihres gesamten Krankenhausaufenthalts zu begleiten und kann genauso verwendet werden wie ein regulärer bariatrischer Schlaufengurt, ist jedoch nicht waschbar.

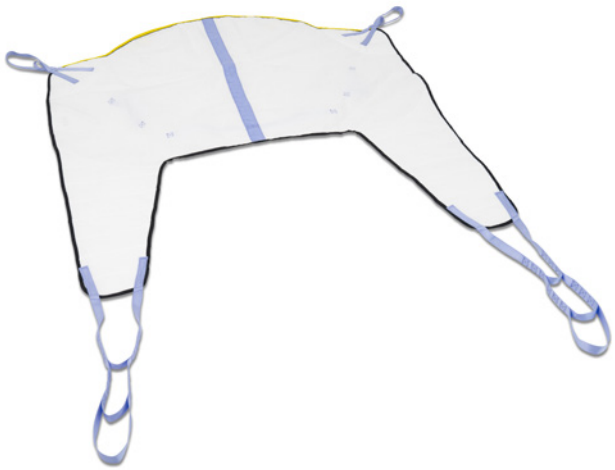

| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MFA8010** |
| Sichere Arbeitslast | 454 kg (1000 lbs) |
| Größe | XS S **M** **L** LL **XL** **XXL** |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | Einwegprodukt für den patientenspezifischen Gebrauch |
| Material | Stitch-Bond-Polypropylenvlies |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Tenor | • Maxi Sky 1000<br>• Maxi Sky 2 Plus |

# CLIPGURT FÜR BEINAMPUTIERTE

Der Clipgurt für Beinamputierte eignet sich für Pflegebedürftige, die beidseitig oberhalb des Knies oder am Hüftgelenk amputiert wurden.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA2090M** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 600
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)



# CLIPGURT FÜR BEINAMPUTIERTE MIT KLETTVERSCHLUSS

Der Clipgurt für Beinamputierte mit Klettverschluss eignet sich für Pflegebedürftige, die über oder unter dem Knie amputiert wurden. Dieser Gurt wird wie ein Standardgurt angelegt, ohne den Pflegebedürftigen auf die Seite zu drehen.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA4040M** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 600
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)

# CLIPGURT FÜR RECHTSSEITIG BEINAMPUTIERTE

Der Clipgurt für rechtsseitig Beinamputierte eignet sich für Pflegebedürftige, deren rechtes Bein über bzw. unter dem Knie oder im Hüftgelenk amputiert wurde. Der Gurt ist so geformt, dass die Amputationsstelle zusätzlich abgestützt wird.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA4070M** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 600
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)



# CLIPGURT FÜR LINKSSEITIG BEINAMPUTIERTE

Der Clipgurt für linksseitig Beinamputierte eignet sich für Pflegebedürftige, deren linkes Bein oberhalb oder unterhalb des Knies oder im Hüftgelenk amputiert wurde. Der Gurt ist so geformt, dass die Amputationsstelle zusätzlich abgestützt wird.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA4080M** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 600
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)

# CLIP-BADEGURT FÜR BEINAMPUTIERTE

Der Clip-Badegurt für Beinamputierte hat das gleiche Design wie der Clipgurt für Beinamputierte, er ist jedoch aus Netzmasche. Er eignet sich für das Baden und Duschen von Pflegebedürftigen, die beidseitig über dem Knie oder im Hüftgelenk amputiert wurden.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA7090M** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe [1] | XS S **M** **L** LL **XL** XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyestergewebe – Netzgewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 600
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)



# SCHLAUFEN-HÄNGEMATTENGURT FÜR BEINAMPUTIERTE

Der Schlaufen-Hängemattengurt für Beinamputierte ist zum Heben von ein- oder beidseitig amputierten Pflegebedürftigen ausgelegt, die während des Transfers jedes Bein einzeln stützen.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MLA7000** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS **S** **M** **L** LL **XL** XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi 500
- Minstrel

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 440
- Maxi Sky 600
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)

# IN-SITU-CLIPGURT FÜR BEINAMPUTIERTE

Der In-situ-Clipgurt für Beinamputierte eignet sich für Pflegebedürftige, die beidseitig oberhalb des Knies oder am Hüftgelenk amputiert wurden. Er kann nach entsprechender klinischer Beurteilung unter dem Pflegebedürftigen verbleiben.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA2050M** |
| Sichere Arbeitslast | 190 kg (418 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyestergewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 600
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)



# IN SITU-CLIP-BADEGURT FÜR BEINAMPUTIERTE

Der In-situ-Badeclipgurt für Beinamputierte eignet sich für das Baden und Duschen von Pflegebedürftigen, die beidseitig über dem Knie oder im Hüftgelenk amputiert wurden. Er kann nach entsprechender klinischer Beurteilung unter dem Pflegebedürftigen verbleiben.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA2080M** |
| Sichere Arbeitslast | 190 kg (418 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Leichtes Polyestergewebe – Netzgewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 600
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)

# CLIP-TOILETTENGURT FÜR BEINAMPUTIERTE

Der Clip-Toilettengurt für Beinamputierte ist mit einer Pflegeöffnung versehen, welche beim Toilettengang und bei der Körperpflege unterstützt. Der Gurt eignet sich für allgemeine Transfers von Pflegebedürftigen, die beidseitig über dem Knie oder im Hüftgelenk amputiert wurden.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA2091M** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S **M** **L** LL **XL** XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 600
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)



# KINDER-CLIPGURT

Der Kinder-Clipgurt eignet sich für tägliche Pflegeaufgaben wie z. B. den Transfer aus dem/ins Bett oder von einem/auf einen Stuhl und wurde speziell für Kinder mit einer zusätzlichen Schnalle im Kopfbereich entwickelt.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA4020M** |
| Sichere Arbeitslast | 125 kg (275 lbs) |
| Größe | **XXS** **XS** **S** M L LL XL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyestergewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi Twin
- Maxi Twin Compact
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)

Seite absichtlich leer gelassen

# Stehhilfe- und Gehgurte





# Gurte für Steh- und Aufrichthilfen

Gurte zur Verwendung mit Steh- und Aufrichthilfen von Arjo. Ermöglicht das Aufrichten von Bewohnern und Patienten aus einem Bett, Stuhl, Rollstuhl oder von der Toilette, um Transfers auszuführen und kurze Strecken zurückzulegen. Der Patient sollte sein Gewicht auf mindestens einem Bein abstützen können und über ausreichende Muskelkraft im Ober- und Unterkörper verfügen.

### Zur Verwendung mit:
- Sara Flex, Sara Plus und Sara Stedy

### Morphologien
- Allgemeine Anwender

### Verfügbare Materialien
- Gestricktes Polyestergewebe (cache-blue)
- Polypropylenvlies
- Polyurethanbeschichtete Webware

### Hauptsächliche Aktivitäten
- Stehende Transfers
- Toilettengang
- Ankleiden
- Positionieren im Stuhl
- Aufstehtraining/-unterstützung
- Rehabilitation
- Ambulante Behandlung

# Mobilisierungsgurte für Deckenlifter und Passiv-Bodenlifter

Der Gurt ist für den unterstützten Transfer und die Rehabilitation von Pflegebedürftigen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit bestimmt. Mit diesem Gurt können Gehübungen sowie Rehabilitations- und Mobilisierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

### Zur Verwendung mit:
- Deckenlifter und passive Bodenlifter

### Morphologien
- Allgemeine Anwender

### Verfügbare Materialien
- Polyester-Material

### Hauptsächliche Aktivitäten
- Aufstehtraining/-unterstützung
- Rehabilitation
- Ambulante Behandlung

# SARA FLEX STEHGURT

Mit dem Sara Flex Stehgurt und einem Lifter kann eine einzelne Pflegekraft einem Pflegebedürftigen mit einer einzigen natürlichen Bewegung aus dem Sitzen in den Stand helfen.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMERN** | **TSS.500 (S) bis TSS.504 (XXL)** |
| Sichere Arbeitslast | 200 kg (440 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

| KOMPATIBLE LIFTER | |
|---|---|
| **Bodenlifter** | **Deckenlifter** |
| • Sara Flex<br>• Sara Stedy | Nicht kompatibel |



# SARA FLEX STEHGURT – SEPARATER GURT MIT EINEM CLIP**

Mit dem Sara Flex Stehgurt – separater Gurt mit einem Clip und einem Lifter kann eine einzelne Pflegekraft einem Pflegebedürftigen mit einer einzigen natürlichen Bewegung aus dem Sitzen in den Stand helfen. Der separate Stützgurt ist schmaler als der befestigte Bauchgurt und nur mit einem Gurtclip versehen, statt mit zwei.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMERN** | **TSS.500S-1C (S) bis TSS.503S-1C (XL)** |
| Sichere Arbeitslast | 200 kg (440 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

| KOMPATIBLE LIFTER | |
|---|---|
| **Bodenlifter** | **Deckenlifter** |
| • Sara Flex<br>• Sara Stedy | Nicht kompatibel |

** nicht in allen Ländern verfügbar

# SARA FLEX SITZ-TRANSFERGURT

Der Sara Flex Sitz-Transfergurt kann bei Bedarf während des Transfers zusätzliche Unterstützung bieten und unterstützt den Pflegebedürftigen beim Sitzen oder bei nachlassender Stehfähigkeit während des Transfers.




| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **TSS.511** |
| Sichere Arbeitslast | 200 kg (440 lbs) |
| Größe | One size |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

| KOMPATIBLE LIFTER | |
|---|---|
| **Bodenlifter** | **Deckenlifter** |
| • Sara Flex | Nicht kompatibel |



# SARA STEHCLIPGURT – FLACH**

Mit der flachen Ausführung des Sara Stehclipgurts kann eine einzelne Pflegekraft einem Pflegebedürftigen mit einer einzigen natürlichen Bewegung aus dem Sitzen in den Stand helfen. Dieser Gurt ist schmaler als der Sara Flex Stehgurt.

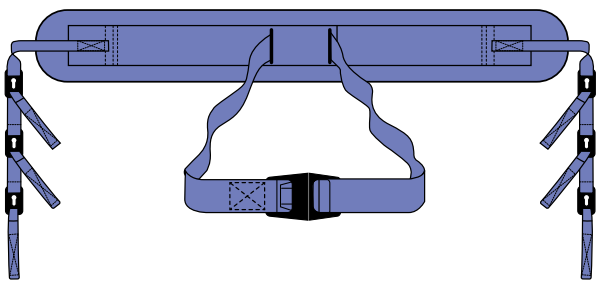

| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA3071M** |
| Sichere Arbeitslast | 180 kg (400 lbs) |
| Größe | One size |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

| KOMPATIBLE LIFTER | |
|---|---|
| **Bodenlifter** | **Deckenlifter** |
| • Sara Flex<br>• Sara Stedy | Nicht kompatibel |

** nicht in allen Ländern verfügbar

# SARA FLEX EINWEG-STEHGURT

Mit dem Sara Flex Einweg-Stehgurt kann eine einzelne Pflegekraft einem Pflegebedürftigen mit einer einzigen natürlichen Bewegung aus dem Sitzen in den Stand helfen. Er trägt zur Infektionsprophylaxe bei und sorgt für sichere Patiententransfers.





| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MFA3000** |
| Sichere Arbeitslast | 200 kg (440 lbs) |
| Größe | One size Lieferung in Packungen mit 10 Gurten |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | Einwegprodukt für den patientenspezifischen Gebrauch |
| Material | Polypropylen-Vliesstoff |

| KOMPATIBLE LIFTER | |
|---|---|
| **Bodenlifter** | **Deckenlifter** |
| • Sara Flex<br>• Sara Stedy | Nicht kompatibel |



# SARA FLEX ABWISCHBARER STEHGURT

Mit dem abwischbaren Stehgurt Sara Flex und einem Lifter kann eine einzelne Pflegekraft einem Pflegebedürftigen mit einer einzigen natürlichen Bewegung aus dem Sitzen in den Stand helfen. Er ist nahtfrei verarbeitet und vollständig abwischbar, sodass er vor der Verwendung für einen neuen Pflegebedürftigen gereinigt werden kann. Dank seines Designs muss der Gurt nicht gewaschen werden, reduziert aber dennoch das Risiko einer Infektionsübertragung, das mit einer gemeinsamen Nutzung von Hilfsmitteln für den Patiententransfer einhergeht.





| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMERN** | **TSS.500W – TSS.503W** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | Zur Reinigung und Desinfektion abwischen |
| Material | Polyurethanbeschichtete Webware |

| KOMPATIBLE LIFTER | |
|---|---|
| **Bodenlifter** | **Deckenlifter** |
| • Sara Flex<br>• Sara Stedy | Nicht kompatibel |

# SARA PLUS STEHGURT

Der Sara Plus Stehgurt unterstützt Pflegebedürftige in Verbindung mit dem Lifter beim aktiven Stehtransfer sowie bei Rehabilitationsaktivitäten, sodass dabei die Unterstützung einer einzelnen Pflege- oder Therapiefachkraft ausreicht.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **KKA5120** |
| Sichere Arbeitslast | 190 kg (418 lbs) |
| Größe | XS **S** **M** **L** LL **XL** XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

| KOMPATIBLE LIFTER | |
|---|---|
| **Bodenlifter** | **Deckenlifter** |
| • Sara Plus | Nicht kompatibel |



# SARA PLUS STEHGURT – MIT GESÄSSUNTERSTÜTZUNG (EPS, EXTRA POSTURAL SUPPORT)

Der Sara Plus Stehgurt – mit Gesäßunterstützung unterstützt Pflegebedürftige in Verbindung mit dem Lifter beim aktiven Stehtransfer sowie bei Rehabilitationsaktivitäten, sodass dabei die Unterstützung einer einzelnen Pflege- oder Therapiefachkraft ausreicht. Er hilft Patienten, sich beim Transfer vom Sitz in den Stand sowie nach dem Toilettengang vollständig aufzurichten.





| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **KKA5370** |
| Sichere Arbeitslast | 190 kg (418 lbs) |
| Größe | XS **S** **M** **L** LL **XL** XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | |
| Material | Polyester-Material |

| KOMPATIBLE LIFTER | |
|---|---|
| **Bodenlifter** | **Deckenlifter** |
| • Sara Plus | Nicht kompatibel |

# SARA PLUS EINWEG-STEHGURT

Der Einweg-Stehgurt Sara Plus unterstützt Pflegebedürftige in Verbindung mit dem Lifter beim aktiven Stehtransfer sowie bei Rehabilitationsaktivitäten, sodass dabei die Unterstützung einer einzelnen Pflege- oder Therapiefachkraft ausreicht. Er trägt zur Infektionsprophylaxe bei und sorgt für sichere Patiententransfers.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MFA4000** |
| Sichere Arbeitslast | 190 kg (418 lbs) |
| Größe | One size |
| | Lieferung in Packungen mit 10 Gurten |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | Einwegprodukt für den patientenspezifischen Gebrauch |
| Material | Polypropylen-Vliesstoff |

| KOMPATIBLE LIFTER | |
|---|---|
| **Bodenlifter** | **Deckenlifter** |
| • Sara Plus | Nicht kompatibel |



# SARA PLUS ABWISCHBARER STEHGURT

Der abwischbare Stehgurt Sara Plus unterstützt Pflegebedürftige in Verbindung mit dem Lifter beim aktiven Stehtransfer sowie bei Rehabilitationsaktivitäten, sodass dabei die Unterstützung einer einzelnen Fachkraft für Pflege oder Therapie ausreicht. Er ist nahtfrei verarbeitet und vollständig abwischbar, sodass er vor der Verwendung für einen neuen Pflegebedürftigen gereinigt werden kann. Dank seines Designs muss der Gurt nicht gewaschen werden, reduziert aber dennoch das Risiko einer Infektionsübertragung, das mit einer gemeinsamen Nutzung von Hilfsmitteln für den Patiententransfer einhergeht.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **KKA6000** |
| Sichere Arbeitslast | 200 kg (440 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | Zur Reinigung und Desinfektion abwischen |
| Material | Polyurethanbeschichtete Webware |

| KOMPATIBLE LIFTER | |
|---|---|
| **Bodenlifter** | **Deckenlifter** |
| • Sara Plus | Nicht kompatibel |

# SARA PLUS GEHGURT

Der Sara Plus Gehgurt unterstützt Pflegebedürftige in Verbindung mit dem Lifter beim aktiven Transfer sowie bei Rehabilitationsaktivitäten, wie z. B. Gleichgewichts-, Schritt- und Gehübungen, sodass dabei die Untersützung einer einzelnen Pflege- oder Therapiefachkraft ausreicht.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **KKA5130M** |
| Sichere Arbeitslast | 140 kg (309 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

| KOMPATIBLE LIFTER | |
|---|---|
| **Bodenlifter** | **Deckenlifter** |
| • Sara Plus | Nicht kompatibel |



# SCHLAUFEN-GEHGURT

Der Schlaufen-Gehgurt ist für den unterstützten Transfer und die Rehabilitation von Pflegebedürftigen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit bestimmt. Er wurde entwickelt, um Personen beim Stehen, Gehen und bei Rehabilitationsaktivitäten zu unterstützen.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **TEM** |
| Sichere Arbeitslast | 200 kg (440 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 80 |
| Material | Polyester-Material |

| KOMPATIBLE LIFTER | |
|---|---|
| **Bodenlifter** | **Deckenlifter** |
| Nicht kompatibel | • Maxi Sky 440<br>• Maxi Sky 2 |

# SCHLAUFEN-GEHWESTE

Die Schlaufen-Gehweste ist für den unterstützten Transfer und die Rehabilitation von Pflegebedürftigen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit bestimmt. Mit diesem Gurt können Gehübungen sowie Rehabilitations- und Mobilisierungsmaßnahmen durchgeführt werden.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA5000** |
| Sichere Arbeitslast | 190 kg (418 lbs) |
| Größe | XS S M L LL XL XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

## KOMPATIBLE LIFTER

**Bodenlifter**

- Maxi Move

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 440

# Körpergurte für den Transfer im Bett und für Liegendtransfers




Maxi Move

# Körpergurte für den Transfer im Bett und für Liegendtransfers

Diese können in Kombination mit einem Deckenlifter oder passiven Bodenlifter dazu beitragen, die Auswirkungen auf den Arbeitsablauf von Pflegekräften zu reduzieren. Sie unterstützen das Positionieren von Patienten im Bett, was auch das Drehen in die und aus der Bauchlage umfasst.

### Befestigungsmethoden

- Clipbefestigung
- Schlaufenenden

### Verfügbare Materialien

- Gestricktes Polyestergewebe (cache-blue)
- Polyestergewebe (blau)
- Polypropylenvlies
- Hochfestes Baumwoll-Polyestergewebe (blau und beige)
- Gewebtes Baumwoll-Polyestergewebe

### Morphologien

- Allgemeine Anwender
- Amputierte Personen
- Bariatrische Personen

### Hauptsächliche Aktivitäten

- Umlagern des Patienten im Bett
- Liegendtransfers (lateral, seitlich)
- Bettwäsche unter dem Patienten wechseln
- Transfer/Aufrichten vom Boden
- Länger andauerndes Halten eines Körperteils zur Durchführung der Patientenversorgung (Wundversorgung, Anlegen von Verbänden, Hilfestellung am Bett usw.).
- Chirurgischer Eingriff
- Drehen in und aus der Bauchlage
- Positionieren einer Röntgenkassette
- Anheben des Rumpfes

# SCHLAUFEN-LIEGEGURT – MIT PFLEGEÖFFNUNG

Der Schlaufen-Liegegurt mit Pflegeöffnung ist für Pflegebedürftige geeignet, die in der Rückenlage transferiert werden und deren gesamter Körper beim Transfer gestützt werden muss.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA1150** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M **L** LL **XL** XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 600
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)



# SCHLAUFEN-LIEGEGURT

Der Schlaufen-Liegegurt ist ausgelegt für die Verwendung bei Pflegebedürftigen, die in der Rückenlage transferiert werden und deren gesamter Körper während des Transfers gestützt werden muss.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA1151** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M **L** LL **XL** XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 600
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)

# SCHLAUFEN-BADELIEGEGURT – MIT PFLEGEÖFFNUNG

Der Schlaufen-Badeliegegurt mit Pflegeöffnung eignet sich dank dieser und dank seines Netzgewebes für die hygienische Versorgung von Pflegebedürftigen, deren Körper beim Transfer in Rückenlage vollständig abgestützt werden muss.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA1152** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | XS S M **L** LL **XL** XXL |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester Netzgewebe Cache-Blue |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Maxi Move | • Maxi Sky 600<br>• Maxi Sky 2-Serie<br>• Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus) |



# EINWEG-SCHLAUFEN-LIEGEGURT

Der Einweg-Schlaufen-Liegegurt ist für Pflegebedürftige geeignet, die in der Rückenlage transferiert werden und deren gesamter Körper beim Transfer gestützt werden muss.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MFA5000** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | One size Lieferung in Packungen mit 10 Gurten |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | Einwegprodukt für den patientenspezifischen Gebrauch |
| Material | Polypropylen-Vliesstoff |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Maxi Move | • Maxi Sky 600<br>• Maxi Sky 2-Serie<br>• Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus) |

# GURTLIEGE

Mit der Gurtliege können Pflegebedürftige in der Rückenlage angehoben werden, ohne dass sie bewegt oder gedreht werden müssen. Sie bietet vollen Zugang und Sichtkontakt für Körperpflege und Wundversorgung.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **700-14945** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | One size |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | Nicht zutreffend |
| Material | Nicht zutreffend |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)



# SCHLAUFEN-POSITIONIERUNGSGURT

Der Schlaufen-Positionierungsgurt hilft Pflegekräften, Pflegebedürftige im Bett zu bewegen oder umzulagern, einschließlich des Drehens in die und aus der Bauchlage sowie des Liegendtransfers von einer ebenen Fläche zur anderen. Er kann zwischen den Transfers unter dem Pflegebedürftigen belassen werden (sofern die klinische Beurteilung dies zulässt).



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA6000** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | One size |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi 500
- Maxi Twin
- Maxi Move

**Deckenlifter**

- 
- Maxi Sky 600
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus)

# SCHLAUFEN-KOMFORT-POSITIONIERUNGSGURT

Der Schlaufen-Komfort-Positionierungsgurt hilft Pflegekräften, Pflegebedürftige im Bett zu bewegen oder umzulagern, einschließlich des Drehens in die und aus der Bauchlage sowie des Liegendtransfers von einer ebenen Fläche zur anderen. Der Gurt kann auch als Bettlaken verwendet werden und zwischen den Transfers unter dem Pflegebedürftigen verbleiben (sofern die klinische Beurteilung dies zulässt).



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **MAA7000** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | Regular Wide |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Gewebtes Polyestergewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Maxi Move | • Maxi Sky 600<br>• Maxi Sky 2-Serie<br>• Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus) |



# EINWEG-SCHLAUFEN-POSITIONIERUNGSGURT

Der Einweg-Schlaufen-Positionierungsgurt hilft Pflegekräften, Pflegebedürftige im Bett zu bewegen oder umzulagern, einschließlich des Drehens in die und aus der Bauchlage sowie des Liegendtransfers von einer ebenen Fläche zur anderen. Er kann das Risiko einer Infektionsübertragung verringern, da er beim jeweiligen Patienten verbleibt. Er kann zwischen den Transfers unter dem Pflegebedürftigen belassen werden (sofern die klinische Beurteilung dies zulässt).



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **AHD001** |
| Sichere Arbeitslast | 272 kg (600 lbs) |
| Größe | One size Lieferung in Packungen mit 5 Gurten |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | Einwegprodukt für den patientenspezifischen Gebrauch |
| Material | Gewebtes Baumwoll-Polyestergewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Maxi 500<br>• Maxi Twin<br>• Maxi Move | • Maxi Sky 600<br>• Maxi Sky 2-Serie<br>• Maxi Sky 2 Plus (Einzel-Modus) |

# BARIATRISCHER SCHLAUFEN-POSITIONIERUNGSGURT

Der bariatrische Schlaufen-Positionierungsgurt hilft Pflegekräften beim Umlagern/Positionieren von schwergewichtigen Patienten im Bett sowie beim Liegendtransfer in Rückenlage von einer ebenen Fläche zur anderen. Die Abmessungen des Gurts sind für die bariatrischen Betten von Arjo geeignet.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **VIG11004-L1** |
| Sichere Arbeitslast | 454 kg (1000 lbs) |
| Größe | One size |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Hochfestes Baumwoll-Polyestergewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Tenor | • Maxi Sky 1000<br>• Maxi Sky 2 Plus |



# BARIATRISCHER EINWEG-SCHLAUFEN-POSITIONIERUNGSGURT

Der bariatrische Einweg-Schlaufen-Positionierungsgurt hilft Pflegekräften beim Umlagern/Positionieren von schwergewichtigen Patienten im Bett sowie beim Liegendtransfer in Rückenlage von einer ebenen Fläche zur anderen. Die Abmessungen des Gurts sind für die bariatrischen Betten von Arjo geeignet. Der Gurt ist dafür konzipiert, Pflegebedürftige während ihres gesamten Krankenhausaufenthalts zu begleiten und kann genauso verwendet werden wie ein regulärer bariatrischer Schlaufen-Positionierungsgurt, ist jedoch nicht waschbar.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **VIG22004-L1** |
| Sichere Arbeitslast | 454 kg (1000 lbs) |
| Größe | One size Lieferung in Packungen mit 5 Gurten |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | Einwegprodukt für den patientenspezifischen Gebrauch |
| Material | Hochfestes Baumwoll-Polyestergewebe |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Tenor | • Maxi Sky 1000<br>• Maxi Sky 2 Plus |

# EXTREMITÄTEN-CLIPGURT

Der Clip-Extremitätengurt ist darauf ausgelegt, die Extremitäten zu stützen, um das manuelle Anheben und Halten der Extremitäten bei Vorgängen wie der Wundversorgung oder der Körperpflege zu reduzieren.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **VIG11000** |
| Sichere Arbeitslast | 70 kg (154 lbs) |
| Größe | One size |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 2-Serie



# SCHLAUFEN-EXTREMITÄTENGURT

Der Schlaufen-Extremitätengurt wurde entwickelt, um die Pflegekraft beim Heben, Stützen und Positionieren der Extremitäten zu unterstützen, und erleichtert so den Zugang bei Aktivitäten wie dem An- und Ausziehen, der Fußpflege, der Versorgung von Wunden und dem Anlegen von Beinverbänden.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **VIG11001** |
| Sichere Arbeitslast | 70 kg (154 lbs) |
| Größe | One size |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 440
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 1000

# BARIATRISCHER SCHLAUFEN-EXTREMITÄTENGURT

Der bariatrische Schlaufen-Extremitätengurt zeichnet sich im Vergleich zu den Stanard-Extremitätengurten durch eine breitere Auflagefläche und eine höhere sichere Arbeitslast aus.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **VIG11002** |
| Sichere Arbeitslast | 120 kg (264 lbs) |
| Größe | One size |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Tenor | • Maxi Sky 2-Serie<br>• Maxi Sky 1000<br>• Maxi Sky 2 Plus |



# SCHLAUFEN-WENDEGURT

Der Schlaufen-Wendegurt ist so konzipiert, dass er angelegt werden kann, ohne dass der Pflegebedürftige gedreht oder bewegt werden muss, und unterstützt die Pflegekraft beim Drehen/Rollen eines Pflegebedürftigen in Rückenlage im Bett.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **VIG11003** |
| Sichere Arbeitslast | 100 kg (220 lbs) |
| Größe | One size |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | 70 |
| Material | Polyester-Material |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Maxi Move<br>• Maxi 500 | • Maxi Sky 440<br>• Maxi Sky 2-Serie<br>• Maxi Sky 1000 |

# EINWEG-CLIP-EXTREMITÄTENGURT

Der Einweg-Clip-Extremitätengurt unterstützt die Pflegekraft beim Heben, Stützen und Positionieren der Extremitäten und erleichtert so den Zugang bei Aktivitäten wie dem An- und Ausziehen, der Fußpflege, der Versorgung von Wunden und dem Anlegen von Beinverbänden. Es handelt sich um ein patientenspezifisches Produkt, das nur für einen begrenzten Zeitraum verwendet werden sollte.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **VIG22000** |
| Sichere Arbeitslast | 70 kg (154 lbs) |
| Größe | One size Lieferung in Packungen mit 5 Gurten |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | Einwegprodukt für den patientenspezifischen Gebrauch |
| Material | Polypropylen-Vliesstoff |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Maxi Move<br>• Maxi 500 | • Maxi Sky 2-Serie |



# EINWEG-SCHLAUFEN-EXTREMITÄTENGURT

Der Einweg-Schlaufen-Extremitätengurt unterstützt die Pflegekraft beim Heben, Stützen und Positionieren der Extremitäten und erleichtert so den Zugang bei Aktivitäten wie dem An- und Ausziehen, der Fußpflege, der Versorgung von Wunden und dem Anlegen von Beinverbänden. Er ist nur für den einmaligen Gebrauch an einem Patienten bestimmt.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **VIG22001** |
| Sichere Arbeitslast | 70 kg (154 lbs) |
| Größe | One size Lieferung in Packungen mit 5 Gurten |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | Einwegprodukt für den patientenspezifischen Gebrauch |
| Material | Polypropylen-Vliesstoff |

**KOMPATIBLE LIFTER**

| Bodenlifter | Deckenlifter |
|---|---|
| • Maxi Move<br>• Maxi 500 | • Maxi Sky 440<br>• Maxi Sky 2-Serie<br>• Maxi Sky 1000 |

# EINWEG-SCHLAUFEN-WENDEGURT

Der Einweg-Schlaufen-Wendegurt ist so konzipiert, dass er angelegt werden kann, ohne dass der Pflegebedürftige gedreht oder bewegt werden muss, und unterstützt die Pflegekraft beim Drehen/Rollen eines Pflegebedürftigen in der Rückenlage im Bett. Es handelt sich um ein patientenspezifisches Produkt, das nur für einen begrenzten Zeitraum verwendet werden sollte.



| ANGABEN ZUM PRODUKT | |
|---|---|
| **ARTIKELNUMMER** | **VIG22003** |
| Sichere Arbeitslast | 100 kg (220 lbs) |
| Größe | One size Lieferung in Packungen mit 5 Gurten |
| Morphologie | |
| Reinigungsverfahren | Einwegprodukt für den patientenspezifischen Gebrauch |
| Material | Polypropylen-Vliesstoff |

## KOMPATIBLE LIFTER

**Bodenlifter**

- Maxi Move
- Maxi 500

**Deckenlifter**

- Maxi Sky 440
- Maxi Sky 2-Serie
- Maxi Sky 1000



# Gleitmatten

## Die Arjo Gleitmatten und Röhren sollen den Pflegekräften helfen, Positionierungsmaßnahmen im Bett und Transfers mit einer geringeren physischen Belastung durch manuelles Bewegen auszuführen.

Gleitmatten können auch beim Anlegen und Anpassen von Gurten verwendet werden, um den Aufwand für die Pflegekraft zu reduzieren, die Positionierung zu erleichtern und das Risiko der Entstehung von Reibung und Scherkräften auf der Haut zu mindern.

Eine Gleitmatte kann verwendet werden, um einen Gurt für den Sitztransfer hinter dem Pflegebedürftigen anzubringen. Sie kann auch verwendet werden, um die Beinteile des Gurts unter bzw. um die Oberschenkel zu führen.

Wenn sich die Person in einer liegenden Position befindet, kann ein Gurt zwischen zwei flachen Gleitmatten eingeführt werden oder, wenn sich die Person in einer seitlichen Liegeposition befindet, mithilfe einer Gleitmatte an der Person angebracht werden.



# Arjo Gleitmatten



Die Arjo Gleitmatten bestehen aus einem hochwertigen, reibungsarmen Gewebe, das mehrfach gewaschen und wiederverwendet werden kann. Die eingenähten Griffe bieten einen komfortablen Halt beim Ziehen, und die Arjo Zugbänder lassen sich einfach an den Griffen befestigen, wenn eine größere Greifweite erforderlich ist.

**Arjo Gleitmatte**

| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NSA0500 | 730 mm (28 3/4") x 1730 mm (68") |



**Arjo Gleitmatte – lang**

| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NSAV5310 | 840 mm (33") x 2000 mm (78 3/4") |



**Arjo Gleitmatte – XL**

| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NSAV5260 | 1095 mm (43") x 1730 mm (68") |



**Arjo Gleitmatte – lang XL**

| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NSAV5320 | 1095 mm (43") x 2000 mm (78 3/4") |



## Arjo Gleitmatte – XXL

| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NSAV5000 | 1460 mm (57 1⁄2") x 1730 mm (68") |



## Arjo Gleitmatte – lang XXL

| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NSAV5330 | 1460 mm (57 1⁄2") x 2000 mm (78 3⁄4") |



## Arjo Zugbänder für Gleitmatten

| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NSA0510 | 660 mm (26") |




8 Stück pro Packung

# Arjo Gleitröhren



Die Arjo Gleitröhren bestehen aus hochwertigem, reibungsarmem Gewebe, das mehrfach gewaschen und wiederverwendet werden kann. Die Produkte bestehen aus zwei Oberflächen, die in Röhrenform zusammengenäht wurden. Dies bedeutet, dass anstelle zweier flacher Gleitmatten nur ein Produkt erforderlich ist, um denselben Grad an Reibungsminderung zu erreichen.

**Arjo Gleitröhre – klein**

| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NSA0600 | 585 mm (23") ø 433 mm (17") |



Eine schmale Erweiterungsröhre kann in Kombination mit den Gleitmatten für normale Bettlänge verwendet werden für den Fall, dass die Körpergröße eines Patienten die Länge der Laken übersteigt.

**Arjo Gleitröhre – Radiologie**

| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NSAV5060 | 670 mm (26 3/8") ø 580 mm (22 13/16") |



Eine kleine Röhre, in die eine Röntgenkassette passt.

**Arjo Gleitröhre – halbe Bettlänge**

| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NSA0900 | 900 mm (35 1/2") ø 1100 mm (43 3/8") |



**Arjo Gleitröhre – lang**

| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NSA0700 | 1960 mm (77") ø 433 mm (17") |



Eine einfach zu benutzende Gleitröhre in voller Bettlänge.

| Arjo Gleitröhre – lang XL | |
|---|---|
| **ARTIKEL-NR.** | **GRÖSSE** |
| NSA0800 | 2100 mm (82 11/16") ø 900 mm (35 1⁄2") |



# Arjo Gleitmatten-Sets

| ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| NSA1000 | 2x Arjo Gleitmatte (#NSA0500)<br>1x Arjo Gleitröhre – klein (#NSA0600) |




| ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| NSA1100 | 2x Arjo Gleitmatte – lang (#NSAV5310)<br>1x Arjo Gleitröhre – klein (#NSA600) |




| ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| NSA1200 | 2x Arjo Gleitmatte – lang (#NSAV5310) |




| ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| NSA1300 | 100x Arjo Gleitmatte – lang (#NSAV5310) |




| ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| NSA2000 | 2x Arjo Gleitmatte (#NSA0500) |




| ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| NSA4000 | 100x Arjo Gleitmatten (#NSA0500) |



| ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| NSA1400 | 2x Arjo Gleitmatte – lang XL (#NSAV5320) |




| ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| NSA6000 | 2x Arjo Gleitmatte – XL (#NSAV5260) |




| ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| NSA7000 | 2x Arjo Gleitmatte – XXL (#NSAV5000) |




| ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| NSA1500 | 2x Arjo Gleitmatte – lang XXL (#NSAV5330) |




| ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| NSA3000 | 2x Arjo Gleitröhre – lang (#NSA0700) |




| ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| NSA510 | 8x Arjo Zugbänder für Gleitmatten |



# Arjo Einweg-Gleitmatten und -röhren

Die Arjo Einweg-Gleitmatten sind für die Verwendung an einem Pflegebedürftigen während seines gesamten Krankenhausaufenthalts bestimmt. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Größen als flache Gleitmatten mit Griffen und Gleitröhren erhältlich.

Die flachen Matten verfügen über eingenähte Griffe, die beim Ziehen komfortablen Halt bieten; sofern eine größere Greifweite erforderlich ist, können die Einweg-Zugbänder unkompliziert an den Griffen befestigt werden.

Die Einweg-Gleitröhren bestehen aus zwei Oberflächen, die in Röhrenform zusammengenäht wurden. Dies bedeutet, dass anstelle zweier flacher Gleitmatten nur ein Produkt erforderlich ist, um denselben Grad an Reibungsminderung zu erreichen.

## Einweg-Zugbänder

Die Einweg-Zugbänder können bei Liegendtransfers an den Gleitmatten befestigt werden. Dadurch wird vermieden, dass sich die Pflegekraft überstrecken muss, und das Risiko von Verletzungen sinkt.

## Stabile integrierte Griffe

Die integrierten verstärkten Griffe bieten während des Patiententransfers eine Möglichkeit zum Festhalten.


## Etikett zur Patientenkennzeichnung

Jedes Produkt ist mit einem Etikett zum Beschriften des Patientennamens sowie einem grünen wasserlöslichen Etikett ausgestattet. Dieses löst sich auf, wenn die Matte gewaschen wird, und zeigt damit genau an, wann die Matte nicht verwendet werden darf.



## Arjo Einweg-Gleitmatte


| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NPA0500 | 760 mm (30") x 1960 mm (77") |

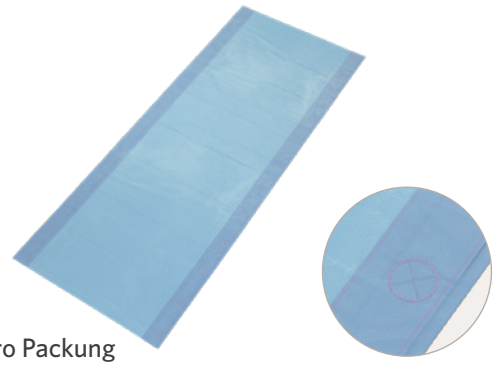

20 Stück pro Packung

## Arjo Einweg-Gleitmatte – XL


| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NPAV5260 | 1140 mm (45") x 1960 mm (77") |

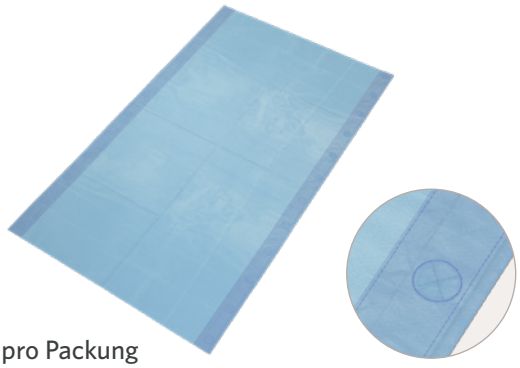

20 Stück pro Packung

## Arjo Einweg-Gleitmatte – XXL


| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NPAV5000 | 1520 mm (60") x 1960 mm (77") |

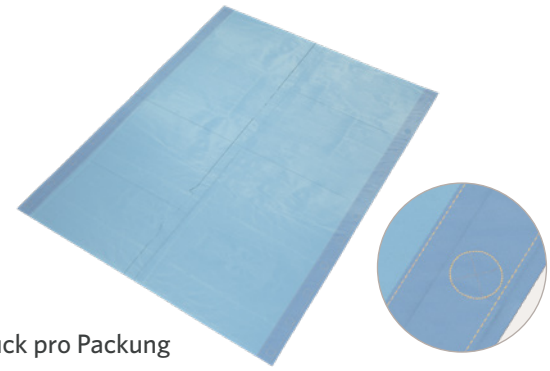

20 Stück pro Packung

## Arjo Einweg-Gleitröhre


| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NPA0700 | 760 mm (30") x 1960 mm (77") |

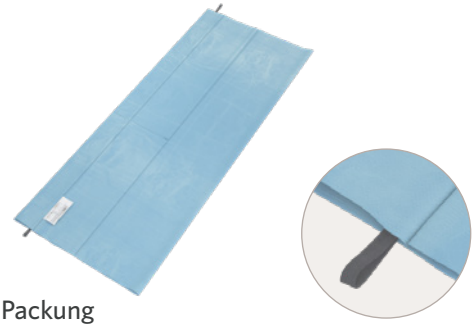

20 Stück pro Packung

## Arjo Einweg-Gleitröhre – XL

| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NPA0750 | 1140 mm (45") x 1960 mm (77") |

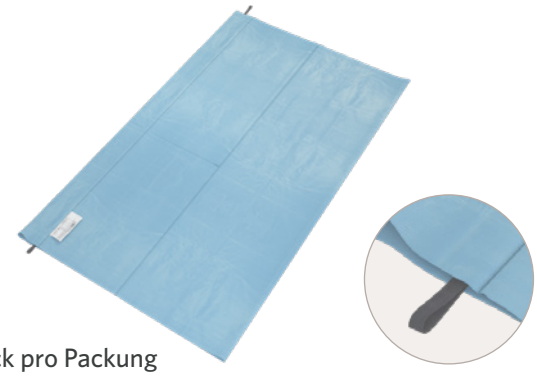

20 Stück pro Packung

## Arjo Einweg-Gleitröhre – halbe Bettlänge

| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NPA0900 | 990 mm (39") x 990 mm (39") |



50 Stück pro Packung

## Arjo Einweg-Zugbänder für Gleitmatten

| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |
|---|---|
| NPA0510 | Länge 800 mm (26") x 40 mm (1 ½") |



50 Stück pro Packung

Wir bei Arjo sind überzeugt, dass „Empowering Movement" (Bewegung stärken) in Gesundheitseinrichtungen für eine qualitativ hochwertige Pflege von entscheidender Bedeutung ist. Unsere Produkte und Lösungen sind darauf ausgelegt, eine sichere und würdevolle Erfahrung durch Transfer, medizinische Betten, Körperhygiene, Desinfektion, Diagnostik sowie Prävention von druckbedingten Verletzungen und venöser Thromboembolie zu fördern. Wir beschäftigen mehr als 6500 Menschen weltweit und verfügen über mehr als 65 Jahre Erfahrung im Umgang mit Patienten/Bewohnern und medizinischem Fachpersonal. Außerdem setzen wir uns für bessere klinische Ergebnisse für Menschen ein, deren Mobilität beeinträchtigt ist.

**Arjo International HQ** · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
**Arjo Deutschland GmbH** · Peter-Sander-Straße 10 · 55252 Mainz-Kastel · Deutschland · +49 6134-186 0
**Arjo AG** · Fabrikstrasse 8/Postfach · 4614 Hägendorf · Schweiz · +41 (0) 61 337 97 77
**Arjo Austria GmbH** · Lemböckgasse 49A · 123 Wien · Österreich · +43 (0) 866 56

**www.arjo.com**

Arjo.A00707.1.0.DE.DE